

Miele

E R G O N O M I C X X
C U B E X E C O D R Y
X **T I M E S A V I N G**
S A F E X W I F I X O
N E W X O **S I M P L E**
O P E R A T I O N E F
F I C I E N T **C U B E**
X O I N T U I T I V E
N A V I G A T I O N X
E C O N O M I C A L X
T O U C H S C R E E N



Cube et Cube X :
Stérilisateurs compacts dentaires


Miele Professional. Immer Besser.*

*Toujours mieux

C U B E
C U B E X



UN SYSTÈME POUR LA STÉRILISATION³

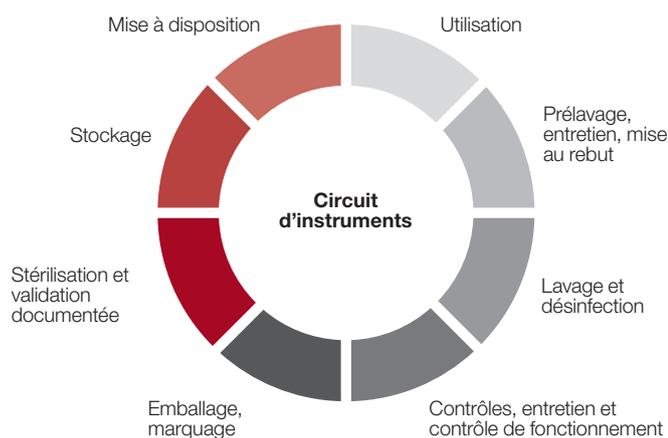

Avec les nouveaux Cube et Cube X, Miele ajoute deux stérilisateurs performants permettant un traitement rapide, sûr et fiable des instruments dentaires à sa solution globale. Les petits cabinets comme les plus grands pourront ainsi gagner un temps précieux et faire des économies en optimisant le traitement de leurs instruments.



SÉCURITÉ ABSOLUE EFFICACITÉ ACCRUE



Grâce à des programmes courts, à une technologie de séchage innovante et à une utilisation intuitive, Cube et Cube X respectent les normes les plus élevées de sécurité, d'ergonomie et de rentabilité au quotidien pour les cabinets dentaires. Ils sont équipés d'un écran couleur tactile pour une utilisation facilitée, offre des performances de séchage optimales et s'intègre facilement à tout environnement informatique pour la traçabilité.

Miele propose chacun des modèles dans deux tailles de chambre différentes pour répondre aux différents besoins des cabinets et cliniques dentaires. Le modèle Cube dispose de toutes les fonctionnalités pour assurer un processus de stérilisation rapide et fiable dans les cabinets dentaires modernes, alors que le modèle premium Cube X offre de nombreuses options supplémentaires innovantes assurant un traitement efficace des instruments du plus haut niveau technique et de rentabilité.

MODÈLE PERFORMANT CUBE

UNE CHAÎNE D'ASEPSIE EFFICACE

Simple, fiable et efficace : le modèle Cube se distingue grâce à ses cycles de lavage courts, ses performances de séchage optimales et sa faible consommation. Disponible en deux tailles de chambre (17 et 22 litres), ce stérilisateur compact offre de nombreuses fonctions pratiques pour des processus de stérilisation efficaces. Élément central d'une solution globale, il optimise tout le circuit des instruments des cabinets dentaires de petite et moyenne taille.

- Réglages pratiques du programme par ex. départ programmable
- Utilisation simple
- Écran couleur tactile moderne
- Design ergonomique
- Traçabilité sans faille
- Connexion Wi-Fi (en option)



PERFORMANT POUR PETITS ET GRANDS CABINETS DENTAIRES

MODÈLE PREMIUM CUBE X

POUR LES EXIGENCES DE QUALITÉ LES PLUS ÉLEVÉES

Innovant, rapide et sûr : le modèle premium Cube X simplifie le travail des cabinets et cliniques dentaires grâce à ses programmes courts, sa technologie de lavage ultra-moderne, sa simplicité de commande et son démarrage programmable. L'appareil est disponible en deux tailles de chambre différentes (17 et 22 litres), dispose d'une technologie de mise en réseau de pointe ainsi que d'une variété de fonctionnalités supplémentaires qui offrent plus de confort et de rentabilité aux cabinets dentaires au quotidien.



- Durées de fonctionnement réduites grâce à la technologie EcoDry
- Identification de l'utilisateur
- Cycles rapides pour instruments non emballés
- Réglages pratiques du programme par ex. départ programmable
- Utilisation simple
- Écran couleur tactile moderne
- Design ergonomique
- Traçabilité sans faille
- Connexion Wi-Fi (en option)
- Assistance moderne à la maintenance avec animation 3D sur l'écran de l'appareil



QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Stérilisation fiable des instruments

Sélection du programme

Cycles de stérilisation adaptés

Un traitement sûr des instruments grâce aux cycles standard de classe B, à un cycle de classe S (selon modèle) et à des cycles test adaptés comme le test de vide.

Réglages pratiques du programme

Personnalisation

Économies significatives de coûts et de temps au quotidien grâce aux réglages individuels des programmes, par ex. départ différé.

Traçabilité sans faille

Prêt à transmettre ses données

Traçabilité simple grâce à l'enregistrement automatique des protocoles de cycles sur clé USB. L'impression des étiquettes de code-barre est simple grâce à l'imprimante d'étiquettes APH 550 Segno de Miele.

Saisie individuelle de l'utilisateur

Identification numérique

Possibilité de saisie numérique des utilisateurs du Cube X qui contrôlent et valident les lots de stérilisation. En plus de la confirmation nécessaire à la validation, le système peut également enregistrer les noms des utilisateurs.

Découvrez encore plus
d'avantages et de
fonctions sur
miele.fr/professional





EFFICACITÉ ET CONFORT

Plus de rentabilité au quotidien

Durées des programmes optimisées

Technologie EcoDry

Les points forts du modèle Cube X sont ses cycles courts, une amélioration de la durée de vie des instruments et l'économie d'énergie. À l'aide de la technologie brevetée EcoDry, la durée de séchage s'adapte au volume du chargement.

Dimensions compactes

Design ergonomique

Grâce à leurs dimensions compactes, ces appareils s'intègrent dans n'importe quel cabinet.

Utilisation simple

Écran couleur tactile intuitif

Le grand écran tactile couleur des appareils et la structure intuitive des menus rendent le travail quotidien de l'équipe du cabinet dentaire plus facile, plus rapide et plus efficace.

Transfert de données simple

Clé USB Wi-Fi

La communication par Wi-Fi est possible en option. Les données peuvent ainsi être transférées très facilement vers d'autres systèmes logiciels.

Grand confort

Vanne de remplissage d'eau automatique

Il est possible de remplir manuellement le réservoir d'eau, mais aussi de raccorder très simplement les appareils au système de traitement de l'eau Miele Plug & Pure.



PLUS D'EFFICACITÉ AU QUOTIDIEN



DEUX MODÈLES, DES CARACTÉRISTIQUES IDÉALES

		Cube		Cube X	
		17 litres PST 1710	22 litres PST 2210	17 litres PST 1720	22 litres PST 2220
Capacité					
Instruments		4,5 kg	5,5 kg	4,5 kg	6 kg
Textiles		1,5 kg	2 kg	1,5 kg	2 kg
Cassettes, containers		9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Programmes et commande (durées des cycles en minutes)					
121 °C universel Temps de maintien : 20,5 min*	vide	65	66	35	35
	charge complète	74	77	62	67
134 °C universel Temps de maintien : 5,5 min*	vide	44,5	45,5	22,5	22,5
	charge complète	54,5	59,5	42,5	46,5
134 °C prions Temps de maintien : 20,5 min*	vide	60	61	38	38
	charge complète	70	75	59	63
Cycle rapide Temps de maintien : 3,5 min	vide	–	–	13	13
	2 kg	–	–	20	21
Test de vide		19	20	17	18
Test Helix – B&D		23	24	21	21
Ports		2 x USB	2 x USB	5 x USB, 1 Ethernet	5 x USB, 1 Ethernet
Dimensions et poids					
Dimensions extérieures H/I/P		452 x 465 x 634 mm	452 x 465 x 634 mm	452 x 465 x 634 mm	452 x 465 x 634 mm
Poids à vide		42,5 kg	44,0 kg	46,0 kg	47,5 kg
Taille de chambre		Ø : 250 mm x P : 362 mm	Ø : 250 x P : 440 mm	Ø : 250 x P : 362 mm	Ø : 250 x P : 440 mm
Raccordement électrique					
Alimentation électrique		200–240 Vac, 50/60 Hz, 10 A	200–240 Vac, 50/60 Hz, 10 A	200–240 Vac, 50/60 Hz, 10 A	200–240 Vac, 50/60 Hz, 10 A
Consommation		2,0–2,4 kW	2,0–2,4 kW	2,0–2,4 kW	2,0–2,4 kW
Conformité aux normes		93/42/CEE, 2014/68/UE, 2012/19/UE, NF EN 13060, EN 61010-1, EN 61010-2-040, EN 61326-1, EN 61770			
Livré avec		3 x plateaux aluminium pour Cube/5 x plateaux aluminium pour Cube X, support de plateau pivotant, support de plateau, tuyau d'évacuation, câble d'alimentation, ouverture de porte et clé USB			

*Les durées de programmes peuvent varier selon le type de charge, la durée de séchage et l'alimentation en eau et en électricité.
Conformes à la norme NF EN 13060, dispositifs médicaux classe IIb - CE 0051. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.
Dispositifs médicaux non remboursables par la Sécurité Sociale.



TRAITEMENT DES INSTRUMENTS **UNE APPROCHE GLOBALE**

Appareils performants, produits chimiques adaptés, logiciels ultra-modernes et qualité de service exceptionnelle : avec System4Dent, Miele Professional offre un système complet innovant pour un traitement sûr et efficace des instruments. Les deux nouveaux stérilisateurs Cube et Cube X sont parfaitement adaptés à l'environnement du cabinet et garantissent une stérilisation efficace, stable et rentable des instruments dentaires. Les cabinets et cliniques dentaires bénéficient ainsi d'une solution complète qui optimise le cycle de fonctionnement et les coûts.





- **Lavage, désinfection et stérilisation**

Laveurs-désinfecteurs innovants avec équipement adapté aux besoins de chaque cabinet. Stérilisateurs compacts performants pour un traitement rapide et sûr de tous les instruments.

- **Produits chimiques**

Produits chimiques formulés sur mesure pour un nettoyage complet et en douceur de tous les instruments

- **Traçabilité**

Logiciel de traçabilité intelligent pour un suivi sans faille des process

- **Service**

L'excellence de Miele se reflète également dans le conseil, le SAV et l'entretien

Miele S.A.S
Z.I. du Coudray
9, avenue Albert Einstein
B.P. 1000
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
www.miele.fr/professional

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Contact Service Commercial

Tél. : 01 49 39 44 44
Fax. : 01 49 39 44 38
Mail : advpro@miele.fr

Contact SAV Professionnel (Intervention)

Tél. : 01 49 39 44 78
Fax. : 01 49 39 34 10
Mail : savpro@miele.fr

Contact Support Technique (Hotline)

Tél. : 01 49 39 44 88
Mail : support.technique@miele.fr

Immer Besser

En tant qu'entreprise familiale, Miele applique fidèlement depuis 1899 la philosophie « Immer Besser » qui signifie « Toujours mieux ». Elle est la garantie d'un niveau de qualité et de production inégalé et reflète la capacité novatrice d'une marque « Made in Germany ». Une promesse qui offre aux utilisateurs professionnels la certitude d'avoir choisi le bon produit.

Récompenses

Grâce à une conception orientée qualité et à une grande fiabilité, Miele est souvent élue par ses utilisateurs comme l'une des marques les plus fiables du marché. Des récompenses de renom, comme le MX Award, le iF ou le reddot Design Award, ainsi que le prix allemand de la durabilité, attestent de la position d'exception occupée par Miele, également en termes de design, de gestion de la qualité et de préservation des ressources.

Compétence

Depuis des décennies, Miele Professional développe et fabrique des lave-linge et lave-vaisselle professionnels, laveurs-désinfecteurs et stériliseurs de très grande qualité. Un service clients très réactif, ainsi que des accessoires sélectionnés avec soin et de nombreuses prestations de conseils permettent d'obtenir à tout moment une performance et une rentabilité optimales avec les appareils de la marque Miele.