

**Miele**




Επιλέξτε την  
αποδοτικότητα.  
Κάντε το Compact.



**Μπείτε σε μια  
νέα διάσταση  
υγιεινής –  
όλα σε μία μονάδα.**

**Ενσωματωμένο  
συρτάρι**  
και εργονομικός  
σχεδιασμός

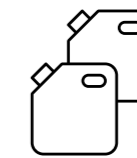

**Χώρος για κάνιστρα  
2x5 λίτρων**  
για χημικά υλικά  
καθαρισμού + 1 φιάλη

**Έξυπνη και γρήγορη**  **λειτουργία** αφής



**Για ένα ευρύ  
φάσμα**  
ιατρικών κλάδων



**Γρήγορα αποτελέσματα**  
για τον αποτελεσματικό  
καθαρισμό-απολύμανση  
των εργαλείων σας

Κατασκευή με γνώμονα  
τη **βιωσιμότητα.**  
Βελτιστοποιημένα  
προγράμματα.

Σχεδιασμένο με βιώσιμο τρόπο ώστε να διαρκεί  
περισσότερο - με ανταλλακτικά διαθέσιμα έως και  
15 χρόνια μετά το τέλος της παραγωγής. Η κατανάλωση  
πόρων προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες των  
επιμέρους φορτίων.



**Miele MOVE  
MedDent+**



Περισσότερα για το CompactLine  
[www.miele.gr/pro/compactline-med](http://www.miele.gr/pro/compactline-med)

## Έξι λόγοι

Γιατί το CompactLine είναι κατάλληλο για εσάς

### 01 Βελτιστοποιημένο & Compact

Το CompactLine είναι η ιδανική λύση για ιατρεία με μικρότερο όγκο εργαλείων, προσφέροντας καθαρισμό-απολύμανση σε σχεδιασμό με αποδοτικό χώρο. Διαθέτει ενσωματωμένη αποθήκευση και δοσομέτρηση χημικών υλικών καθαρισμού, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στα κάνιστρα για μεγαλύτερη ευκολία. Το CompactLine προσφέρει απόδοση και αξία, καλύπτοντας τις απαιτητικές ανάγκες του ιατρείου σας με την άνεση μιας συσκευής βασικού επιπέδου.



### 02

#### Γρήγορο & διαισθητικό

Το CompactLine παρέχει γρήγορα αποτελέσματα. Η έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών προσφέρει εύκολη πρόσβαση στο πρόγραμμα που προτιμάτε, ενώ η καθοδήγηση στην οθόνη βοηθάει στη βασική συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Τα σχέδια με μεγάλα σύμβολα στην οθόνη δείχνουν επίσης την κατάσταση του προγράμματος και την απελευθέρωση παρτίδας στην οθόνη, εξασφαλίζοντας ομαλή και απροβλημάτιστη λειτουργία.

### 03

#### Βολικό & ευέλικτο

Το CompactLine ενισχύει τη ροή εργασίας με ένα φως στο εσωτερικό του θαλάμου που εξασφαλίζει σαφή ορατότητα κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα και ένθετά του καλύπτουν διάφορες ειδικότητες, παρέχοντας διεξοδικό καθαρισμό-απολύμανση για όλα τα εργαλεία. Η γλώσσα λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί γρήγορα μέσω ενός κουμπιού αφής στην οθόνη, προσφέροντας απρόσκοπτη προσαρμογή στις ανάγκες του ιατρείου σας.

### 04

#### Ισχύς και αξιοπιστία

Απολαύστε την ανώτερη δύναμη καθαρισμού. Η αντλία μεταβλητής ταχύτητας της CompactLine προσαρμόζει την πίεση πλύσης στις μοναδικές απαιτήσεις κάθε φάσης επεξεργασίας. Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες παρακολουθούν τη λειτουργία του βραχίονα πλύσης και την πίεση πλύσης, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση. Τα φίλτρα πολλαπλών σταδίων παρέχουν επιπλέον ασφάλεια. Η CompactLine πληροί όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του EN ISO 15883, για απόλυτη ασφάλεια.



### 05

#### Βιώσιμο & με μεγάλη διάρκεια

Δοκιμασμένο σε 15.000 ώρες λειτουργίας, το CompactLine εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Τα ανταλλακτικά παραμένουν διαθέσιμα για τουλάχιστον 15 χρόνια μετά το τέλος της παραγωγής. Το οικονομικό πρόγραμμα του συστήματος βελτιστοποιεί την απόδοση με σύντομες διάρκειες προγράμματος, εξοικονομώντας νερό, ενέργεια και χημικά. Διαθέτοντας ψηφιακές οδηγίες χρήσης και συσκευασία φιλική προς το περιβάλλον, η CompactLine συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία με τη βιωσιμότητα.

### 06

#### Έξυπνο & φιλικό για το service

Απολαύστε την απρόσκοπτη ενσωμάτωση με το δίκτυο του ιατρείου σας για γρήγορη και εύκολη ρύθμιση. Το CompactLine προσφέρει ασφαλή τεκμηρίωση διαδικασίας με προσαρμοσμένα δικαιώματα πρόσβασης για ενισχυμένο έλεγχο. Χάρη στο Miele MOVE MedDent+, μπορείτε να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα της συσκευής από οπουδήποτε και να λαμβάνετε άμεσες κλήσεις service σε περίπτωση εμφάνισης σφαλμάτων. Επιπλέον, η εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα απλοποιεί τη συντήρηση και εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία.

# Μια Compact επισκόπηση

Το CompactLine είναι ένα αποτελεσματικό, φιλικό προς το χρήστη σύστημα καθαρισμού-απολύμανσης. Προσφέρει γρήγορο, υγιεινό πλύσιμο και απολύμανση με προηγμένα χαρακτηριστικά για εξορθολογισμένες λειτουργίες, εξασφαλίζοντας ασφαλή και αποτελεσματικά αποτελέσματα.

## Συρτάρι για χημικά καθαρισμού

- Push2Open για ευκολότερο χειρισμό
- Εξοπλισμένο με 2 ή 3 δοσομετρικές αντλίες για υγρά χημικά υλικά καθαρισμού
- Σωλήνας αναρρόφησης με ανίχνευση στάθμης κενού για μεγαλύτερη ασφάλεια της διεργασίας και εύκολη αναπαραγγελία χημικών υλικών καθαρισμού

## Βελτιστοποιημένος θάλαμος

- Εργονομικό ύψος πόρτας για πιο άνετη λειτουργία
- Φως θαλάμου για λεπτομερή ορατότητα
- Ισχυρή αντλία μεταβλητής ταχύτητας για αποτελεσματικό καθαρισμό
- Συγκόλληση με λέιζερ χωρίς ραφές, για υψηλότερα επίπεδα υγιεινής

## Μεγάλη, διασθητική έγχρωμη οθόνη αφής

- Ορατά σύμβολα κατάστασης
- Απελευθέρωση παρτίδας απευθείας στον πίνακα ελέγχου για την υποστήριξη της ροής εργασιών
- Οδηγίες αυτοβοήθειας με κινούμενα σχέδια για διαδικασίες ρουτίνας

## Συνδεσιμότητα & τεκμηρίωση διαδικασιών

- WiFi ενσωματωμένο στον πίνακα ελέγχου, προαιρετική θύρα LAN
- Με το Miele MOVE MedDent+ τα δεδομένα της συσκευής μπορούν να προβληθούν ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας
- Πρόσβαση στις ενημερώσεις του μηχανήματος και πλήρης διαφάνεια των δεδομένων της διαδικασίας

## Αποδοτικά προγράμματα

- Γρήγορα, ειδικά προγράμματα για διάφορους ιατρικούς κλάδους
- EcoDry και AutoOpen για αποτελεσματικό στέγνωμα
- Περιλαμβάνονται περαιτέρω ελεύθερες θέσεις προγράμματος και προεπιλογή ώρας



# Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα ιατρικών κλάδων

Χάρη σε ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων ειδικά σχεδιασμένων για διαφορετικούς τύπους εργαλείων, το CompactLine είναι ιδανικό για επαγγελματίες που ασκούν διαφορετικές ειδικότητες καθώς και για διεπιστημονικές ομάδες. Χάρη σε ένα ευέλικτο σύστημα κάνιστρων, κάθε φορτίο μπορεί να βελτιστοποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης χωρητικότητα της συσκευής. Αυτό σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε ώρες, κόστος και πόρους.


## Δείγμα φορτίων:




Γυναικολογία



Ποδολογία

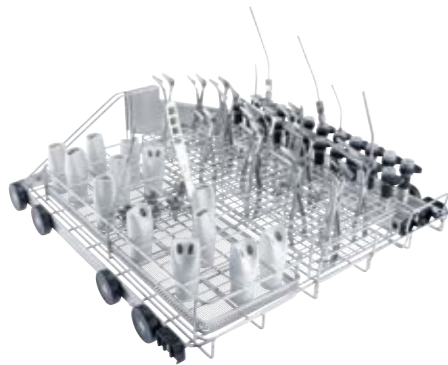

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

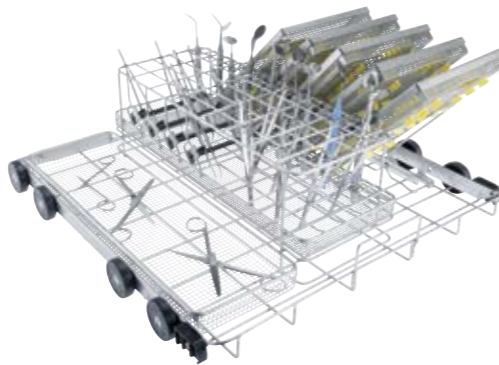

Δερματολογία

Πλυντήριο απολύμανσης	PWD 8682C	PWD 8682 C DST
Συσκευή κάτω πάγκου/ανεξάρτητη με καπάκι	♦	♦
Αντλία κυκλοφορίας [Qmax. l/min]	500	500
<b>Διακόπτες/προγράμματα</b>		
TouchControl/Αριθμός προγραμμάτων	13	13
Διαθέσιμες θέσεις προγραμμάτων	5	5
AutoClose - Αυτόματο κλείδωμα πόρτας	♦	♦
LED για φωτισμό θαλάμου πλύσης	2	2
Βομβητής, ηχητικό σήμα στο τέλος του προγράμματος	♦	♦
Μονάδα επικοινωνίας Ethernet	Προαιρετικό	Προαιρετικό
Μονάδα επικοινωνίας WiFi	♦	♦
<b>Παροχές νερού</b>		
1x κρύο νερό, πίεση ροής 2,0-10 bar (200-1000 kPa) (προστασία από ανάστροφο σιφονισμό σύμφωνα με το EN 1717)	♦	♦
1x πλήρως ασφατωμένο νερό, πίεση ροής 2,0-10 bar (200-1000 kPa) (προστασία από ανάστροφο σιφονισμό σύμφωνα με το EN 1717)	♦	♦
1x ζεστό νερό, πίεση ροής 2,0-10 bar (200-1000 kPa) (προστασία από ανάστροφο σιφονισμό σύμφωνα με το EN 1717)	♦	♦
Αριθ. εύκαμπτων σωλήνων παροχής, 1/2" με σύνδεσμο με σπείρωμα 3/4", L = περ. 2,0 m	3	3
Αντλία αποστράγγισης Ø 22, ύψος παροχής: μέγ. 100 cm	♦	♦
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών (WPS)	♦	♦
<b>Ηλεκτρολογική σύνδεση</b>		
3 N AC 400 V 50 Hz μετατρέψιμο σε AC 230V 50Hz, καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης περίπου 2,0 m, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> με βύσμα CEE	♦	♦
Θέρμανση [kW]	8,5	8,5
Αντλία κυκλοφορίας [kW]	0,8	0,8
Συνολικό ονομαστικό φορτίο [kW]	9,3	9,3
Προστασία με ασφάλεια [A]	3 x 16	3 x 16
<b>Συστήματα δοσολογίας</b>		
1 δοσομετρική αντλία για υγρό καθαριστικό (μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 217 mm, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ύψος κάνιστρου έως 202 mm)	♦	♦
1 δοσομετρική αντλία για ουδετεροποιητικού παράγοντα (μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 217 mm, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ύψος κάνιστρου έως 202 mm)	–	♦
1 δοσομετρική αντλία για το λαμπρυντικό (μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 217 mm, κατάλληλο για ύψος κάνιστρου έως 202 mm)	♦	♦
<b>Αποσκληρυντής νερού</b>		
Για ζεστό και κρύο νερό, έως 65°C	♦	♦
<b>Συμπυκνωτής ατμών</b>		
Αερόλυμα	♦	♦
<b>Διαστάσεις, βάρος</b>		
Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm]	835/600/600	835/600/600
Διαστάσεις θαλάμου πλύσης Υ/Π/Β [mm]	400/536/523	400/536/523
Ωφέλιμη περιοχή κάτω κάνιστρου Υ/Π/Β [mm]	280/490/498	280/490/498
Βάρος [kg]	81	81
<b>Διαστάσεις συρταριού</b>		
Ωφέλιμη περιοχή Υ/Π/Β [mm] για 2 κάνιστρα x 5 λίτρων	240/305/285	240/305/285
Ωφέλιμη επιφάνεια Υ/Π/Β [mm] για 1 φιάλη x 1 λίτρο	240/160/125	240/160/125
<b>Επιλογές περιβλήματος</b>		
Λευκό λωτού (LW)	♦	♦
Ανοξείδωτος κάλυβας (SST)	♦	♦
<b>Συμμόρφωση με τα πρότυπα</b>		
DIN EN ISO 15883-1/2/6, EN 61010-2-040, EN 61326 -1	♦	♦
<b>Πιστοποιητικά δοκιμών</b>		
IP 21	♦	♦
CE 0297	♦	♦
Κανονισμός ιατροτεχνολογικών προϊόντων 2017/745/EE	♦	♦



# Η προστασία αξίζει την καλύτερη εξυπηρέτηση.

## Επισκευές και ανταλλακτικά

Στόχος μας είναι πάντα να διορθώνουμε τυχόν βλάβες το συντομότερο δυνατό. Είμαστε εδώ για εσάς, συντονίζοντας τα ραντεβού και προσφέροντας τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων ανταλλακτικών - για τουλάχιστον 15 χρόνια μετά τη λήξη της παραγωγής της συσκευής σας.

## Τακτικό service

Για να αποφύγετε διαταραχές στην καθημερινή σας εργασία, η τακτική προληπτική συντήρηση είναι απαραίτητη. Επιλέξτε ένα από τα πακέτα service μας και επωφεληθείτε από τη μακροπρόθεσμη προστασία των συσκευών σας.

## Επιθεωρήσεις και συντήρηση

Οι τακτικοί έλεγχοι των παραμέτρων διεργασίας ενισχύουν την ασφάλεια λειτουργίας και εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο αποτελεσμάτων καθαρισμού. Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να παρέχουμε συμβουλές για τη βέλτιστη συντήρηση της συσκευής.



## Η υπηρεσία μας ονομάζεται PROtect.

Το PROtect συνδυάζει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, μέγιστο έλεγχο του προϋπολογισμού και απρόσκοπτη προμήθεια ανταλλακτικών. Η επαγγελματική μας ομάδα εκτελεί τις εργασίες service γρήγορα και αξιόπιστα, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη εγκατάσταση και τη συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα.



Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις service PROtect μας.  
[www.miele.gr/pro/service](http://www.miele.gr/pro/service)

# Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός συναντά τη βιώσιμη υπευθυνότητα.

Η CompactLine έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Τα αποδοτικά σε πόρους προγράμματα ελαχιστοποιούν τη χρήση νερού, ενέργειας και χημικών, ενώ οι προσαρμόσιμες ρυθμίσεις εξασφαλίζουν βέλτιστη απόδοση. Κατασκευασμένο για ανθεκτικότητα και μακροχρόνια χρήση, το CompactLine επιτρέπει επισκευές και προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής και εύκολες επισκευές, μειώνοντας τα απόβλητα και εξασφαλίζοντας διαρκή αξία για το ιατρείο σας.



Περισσότερα για τη βιωσιμότητα στη Miele Professional  
[www.miele.gr/pro/sustainability](http://www.miele.gr/pro/sustainability)



**Miele**



# Τίποτα δεν υποκαθιστά την **προσωπική επαφή.**

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να βρούμε στο  
την καλύτερη λύση για τις ανάγκες του ιατρείου σας.

**Τηλ.: 210 67 94 444 (εσωτ. 2)**

Δευ.-Παρ. 8:00 πμ-5:00 μμ



Περισσότερα για την CompactLine και  
στοιχεία επικοινωνίας  
[www.miele.gr/pro/compactline-med](http://www.miele.gr/pro/compactline-med)