


Miele

Caricare le lavavetriere di grandi dimensioni non è mai stato così semplice.

Novità: il carrello di carico APLW 511 –
Maggiore capacità. Maggiore flessibilità. Rapida disponibilità.

Miele Professional. Immer Besser.

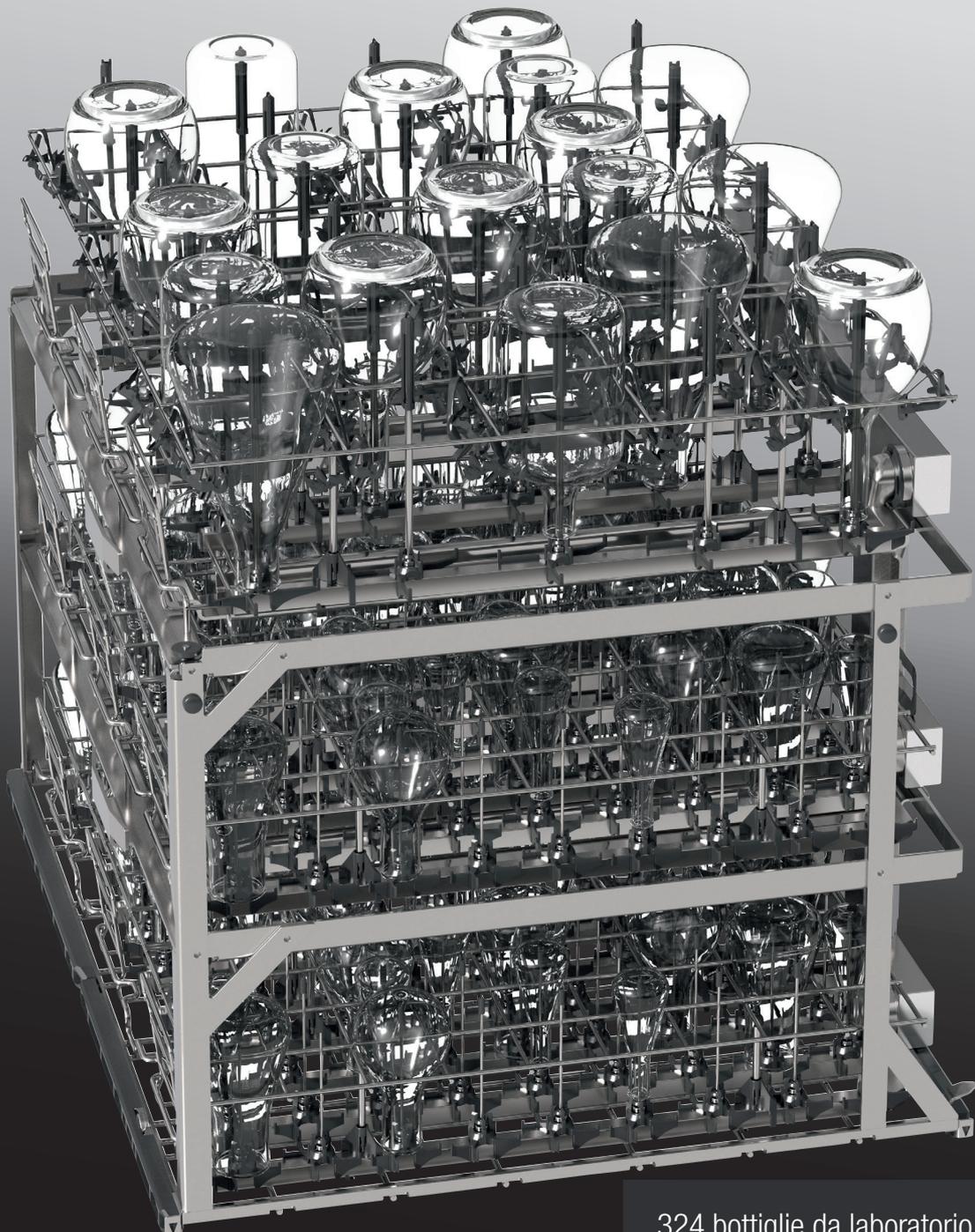

324 bottiglie da laboratorio oppure
294 fiale e 216 bottiglie

Vantaggi del prodotto APLW 511

Il nuovo carrello di carico offre la massima capacità per il trattamento di diverse tipologie di vetreria da laboratorio e consente una rapida disponibilità e un trattamento più efficiente in termini di costi. È utilizzabile nelle lavavetriere PLW 8615, PLW 8616 e PLW 8617.

Il concetto dei supporti di carico modulari permette di utilizzare gli accessori in base alle esigenze individuali. Grazie a questo sistema con un ridotto numero di accessori si ha una grande varietà di combinazioni in poco spazio.

- Elevata capacità: impiego di massimo 9 moduli su 3 ripiani, aumento del 50% della capacità per vetreria da laboratorio di piccole e medie dimensioni e della quantità massima di moduli a iniezione (e iniettori)
- Maggiore flessibilità: opzioni di carico versatili, asticelle estraibili
- Rapida disponibilità: un'elevata capacità di carico nel lavaggio rende disponibile la vetreria dove deve essere utilizzata.

Esempio di carico APLW 511

L'esempio di carico sulla prima pagina mostra il modello APLW 511 con 6 moduli A 622 con griglia di supporto A 852 (ripiani 1 e 2) e 3 moduli A 620 con griglia di supporto A 850 (ripiano 3) compresi ugelli iniettori.

Carrello APLW 511

- Per il lavaggio di vetreria e utensili da laboratorio mediante moduli a iniezione o inserti
- A seconda dell'altezza possono essere impiegati fino a 9 moduli
- Utilizzando il modulo A 606 sui ripiani 2 e 3 si ottengono le seguenti altezze di carico: ripiano 1: 205 mm, ripiano 2: 205 mm, ripiano 3: 215 mm
- Listelli e asticelle parzialmente rimovibili per l'impiego di moduli alti

N. mat. 11852850




Componenti modulari e flessibili per il carico dell'APLW 511

Il sistema EasyLoad rende il trattamento della vetreria da laboratorio più rapido, semplice e sicuro. La vetreria da laboratorio si posiziona correttamente nel supporto di carico in modo ancor più facile e veloce. Lavaggio interno accurato di vetreria dalla forma e dalle dimensioni più disparate.

Maggiori informazioni sui moduli EasyLoad nel nostro **prospetto completo per laboratori** e online su www.miele-professional.it



Soluzione per vetreria da laboratorio di grandi dimensioni: modulo A 620, 5 ugelli iniettori A 840 e 5 A 841 e griglia di supporto A 850

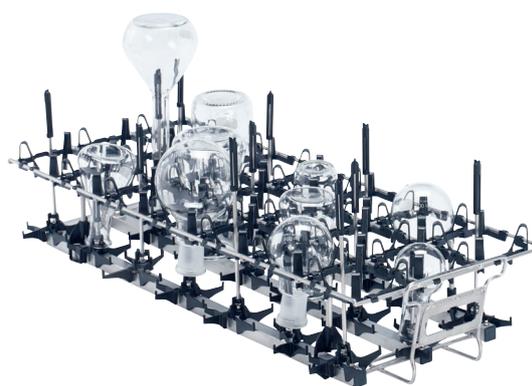


Soluzione per vetreria da laboratorio di medie dimensioni: modulo A 621, 10 ugelli iniettori A 842 e 10 A 843 e griglia di supporto A 851



Soluzione per vetreria da laboratorio di piccole dimensioni: modulo A 622, 18 ugelli iniettori A 844 e 18 A 845 e griglia di supporto A 852



A 613 modulo per pipette

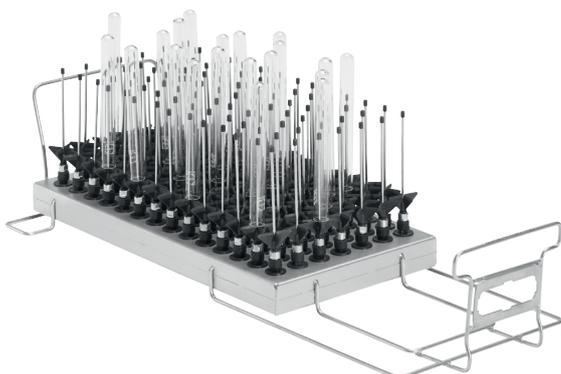

A 605 modulo per fiale



A 606 modulo per inserti

Miele Italia S.r.l.

Strada di Circonvallazione, 27
39057 Appiano - S. Michele (BZ)
info@miele-professional.it
www.miele-professional.it

Online store

www.mieleprofessionalclick.it

Contact Center Professional

tel. 0471 666 319
lun-ven 8.00-20.00
sab. 09.00-12.00 / 14.00-18.00

Immer Besser

Miele è un'azienda familiare che dal 1899 opera secondo la filosofia Immer Besser. Quest'ambizione è la base per la proverbiale qualità, la sostenibilità e la forza innovatrice di un marchio "Made in Germany". Una promessa che dà agli utenti professionali la consapevolezza di aver scelto il prodotto giusto.

Eccellenza premiata

Affidabilità senza compromessi in termini di prodotti e servizio di assistenza è il motivo per cui Miele regolarmente viene premiata come miglior marchio in cui il cliente ripone maggiore fiducia. Riconoscimenti prestigiosi di design come MX Award, iF, reddot e il premio tedesco per la sostenibilità provano l'eccellenza di Miele in materia di design, gestione della qualità e tutela delle risorse.

Competenza

Da decenni Miele Professional sviluppa e produce con un elevato grado di integrazione verticale pregiate macchine da lavanderia, lavastoviglie, apparecchiature per il lavaggio e la disinfezione e sterilizzatori. Accessori specifici, un servizio di consulenze completo e il veloce servizio di assistenza tecnica Miele consentono di ottenere da queste macchine sempre il massimo in termini di prestazioni e redditività.