

Miele

Al servizio dell'igiene.
Le lavapadelle Miele per cliniche e case di cura.

Miele Professional. Immer besser.



Qualità Miele Professional

Pretendere semplicemente il massimo



Miele Professional è da sempre sinonimo di massima affidabilità in tutte le applicazioni critiche dal punto di vista igienico. I termodisinfettori sono dei collaboratori imprescindibili e pertanto molto richiesti nel trattamento medico degli strumenti, mentre le lavatrici Igiene e le lavastoviglie con sistema ad acqua pulita vengono particolarmente apprezzate nelle intense giornate di lavoro di cliniche, case di cura e per anziani. Le nuove lavapadelle Miele integrano l'offerta in modo perfetto e sono di supporto per eliminare lo stress dalla prassi quotidiana. Al servizio dell'igiene.

Qualità

La proverbiale qualità Miele deve la sua fama a macchine durature, costruite con materiali pregiati. Per questo motivo tutte le nuove lavapadelle Miele vengono prodotte in acciaio inossidabile, con componenti selezionati. Per Miele Professional la qualità comprende anche altri aspetti. Ne fanno parte i pratici dettagli per operazioni di carico rapide, igieniche e sicure, così come gli elementi di comando ergonomici, oltre a un facile posizionamento persino in ambienti dagli spazi limitati.

Efficienza

Con le nuove lavapadelle Miele Professional si opta per una soluzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e decisamente economica. Il potente sistema ad ugelli consente un lavaggio accurato degli oggetti da trattare con consumi minimi di acqua, energia e prodotti chimici. Anche la struttura robusta, che non necessita una manutenzione particolare, rende la lavapadelle un investimento razionale, che si ripaga anno dopo anno.

Prestazioni

Le lavapadelle Miele rimuovono in modo affidabile tutto lo sporco da padelle e pappagalli, siano essi in acciaio inossidabile o in plastica. Questa accuratezza deriva da una disposizione innovativa di ugelli fissi e rotanti, così come da programmi di lavaggio mirati in base al tipo di necessità.



Con Miele Professional si scelgono alta qualità, ottima resa e prestazioni eccellenti. Queste preziose apparecchiature soddisfano pienamente le aspettative giorno dopo giorno e dimostrano di meritare la grande fiducia riposta in loro dagli utenti professionisti: il 97% di tutti i clienti* ricomprerebbe una macchina Miele Professional.

Affidabilità

Da quattro generazioni in Miele, da sempre un'azienda a conduzione familiare, ci impegniamo per agire a favore di clienti, partner commerciali e collaboratori, prodotti, processi e non da ultimo risorse impiegate.

Puntiamo a uno sviluppo dei prodotti coerente, basato su qualità, lunga durata e sostenibilità

Innovazioni dal marchio "Made in Germany"

Design di prodotto più volte premiato per ergonomia e funzionalità

Soluzioni complete da un unico produttore
Bassi costi di esercizio per l'intera durata di vita della macchina

Un servizio eccellente e premiato, con una rete capillare di tecnici pronti a intervenire rapidamente

55
YEARS Medical Technology



Lavapadelle Miele Professional

Massima affidabilità, sicurezza ed efficienza



Sicurezza d'igiene

Le lavapadelle sono state progettate per impedire una trasmissione dei germi patogeni, a protezione non solo dei pazienti delle cliniche o degli ospiti delle case di cura, ma anche del personale. Le macchine al termine del lavaggio eseguono una disinfezione termica degli oggetti da trattare, secondo le attuali direttive e raccomandazioni, garantendo così l'osservanza dei più alti standard igienici.

Massima tutela ed efficienza


Con le lavapadelle Miele la sicurezza d'igiene viene raggiunta su più livelli. Le superfici in acciaio inossidabile completamente lisce con fessure ridotte al minimo sono particolarmente facili da pulire. Inoltre la costruzione della vasca di lavaggio priva di saldature contrasta attivamente eventuali residui. A seconda del modello, l'apertura e/o la chiusura automatica dello sportello aumentano ulteriormente la garanzia d'igiene.

Maggiore comfort d'uso grazie a pratici accessori

Si può scegliere tra vari supporti di carico. In questo modo è possibile trattare una grande quantità di oggetti. Vuotatoi con il risciacquo manuale o automatico dei bordi integrano alla perfezione il sistema.

Tutti i vantaggi di prodotto in sintesi

Lavapadelle Miele serie PWD

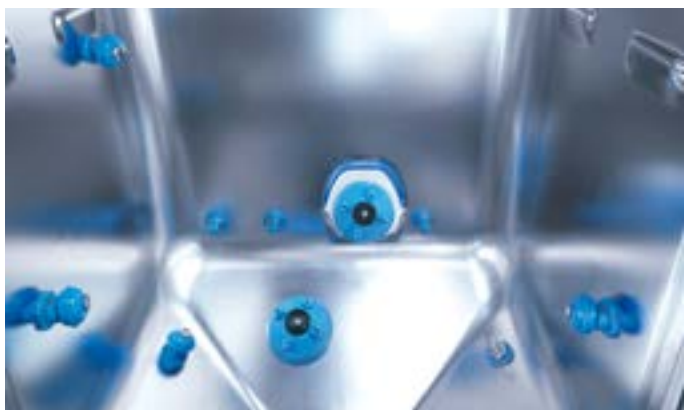

Sistema di lavaggio e disinfezione altamente sviluppato

- Sistema di lavaggio con ugello rotante Multijet (a seconda del modello)
- Numerosi ugelli rotanti e fissi garantiscono una distribuzione idrica e dei prodotti chimici senza zone d'ombra
- Tutte le pareti interne ed esterne dell'oggetto da trattare vengono bagnate e lavate in modo efficace e riproducibile
- La camera di lavaggio e il rivestimento della macchina sono in acciaio inossidabile
- La vasca di lavaggio priva di saldature e dagli angoli arrotondati previene la formazione di residui e il trascinamento di germi
- Disinfezione termica della vasca di lavaggio e degli ugelli a ogni ciclo



Comandi intelligenti

- Controllo costante della macchina e indicazione in tempo reale dello stato della macchina
- Adeguamento personalizzato dei programmi e dei parametri di lavaggio alle necessità del cliente
- Tre programmi di lavaggio per diversi tipi di sporco
- Comandi semplici grazie ai tasti di scelta rapida
- Un display dai testi chiari mostra tutti i dati più rilevanti, ad es. il nome e lo stato del programma in corso, la durata residua, il valore A0 raggiunto, la temperatura massima di lavaggio (a seconda del modello)



Ergonomia e sicurezza

- Comandi automatizzati sportello disponibili per tutti i modelli: comandi a pedale senza contatto manuale
- Gli oggetti contaminati da trattare vengono caricati nella macchina ad un'altezza di lavoro ergonomica (a seconda del modello)
- Per un ulteriore aumento della sicurezza dei comandi e dell'ergonomia delle operazioni
- Blocco automatico dello sportello all'avvio del programma

Lavapadelle PWD 8541

PWD 8541 MD, PWD 8541 AD



PWD 8541 MD

da sottopiano, con apertura/chiusura sportello manuale

PWD 8541 AD

da sottopiano, con apertura/chiusura sportello automatica

Particolarità

- H 850, L 600, P 600 mm
- Prestazioni/carico fino a 1 padella e 1 pappagallo o 4 pappagalli *
- Comandi semplici - Tasti di scelta rapida
- Livello di disinfezione in base alle esigenze - Valore A0 impostabile
- Posizionamento anche in spazi ristretti - Dimensioni compatte
- Programmazione cliente personalizzabile - Elettronica programmabile

* La capacità dipende dal tipo di oggetti da lavare e può variare. Sono possibili diverse combinazioni di pappagalli e padelle.

Esempi di carico



Lavapadelle PWD 8545

PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD



Esempi di carico

PWD 8545 MD

da libero posizionamento, con apertura/chiusura sportello manuale

PWD 8545 SAD

da libero posizionamento, con apertura sportello automatica tramite pedale e chiusura sportello manuale

PWD 8545 AD LCD

da libero posizionamento, apertura/chiusura sportello automatica e display LCD

Particolarità

- H 1630, L 545, P 475 mm
- Prestazioni/carico fino a 1 padella e 1 pappagallo o 3 pappagalli *
- Comandi semplici - Tasti di scelta rapida
- Livello di disinfezione in base alle esigenze - Valore A0 impostabile
- Risultati di lavaggio ottimali - Ugello rotante Multijet
- Programmazione cliente personalizzabile - Elettronica programmabile

* La capacità dipende dal tipo di oggetti da lavare e può variare. Sono possibili diverse combinazioni di pappagalli e padelle.



Lavapadelle PWD 8549

PWD 8549 AD



Esempi di carico

PWD 8549 AD

da libero posizionamento, con sportello automatico a ghigliottina in vetro

Particolarità

- H 1750, L 600, P 610 mm
- Prestazioni/carico fino a 1 padella e 2 pappagalli *
- Comandi semplici - Tasti di scelta rapida
- Livello di disinfezione in base alle esigenze - Valore A 0 impostabile
- Risultati di lavaggio ottimali - Ugello rotante Multijet
- Programmazione cliente personalizzabile - Elettronica programmabile
- Soluzione salva-spazio grazie al movimento in verticale dello sportello



* La capacità dipende dal tipo di oggetti da lavare e può variare. Sono possibili diverse combinazioni di pappagalli e padelle.

Dati tecnici

Lavapadelle, vuotatoi



Lavapadelle	PWD 8541 MD, 8541 AD	PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD
Nr. pappagalli per carico max.	4	3
Nr. padelle/pappagalli per carico	1/1	1/1
Programmi	3	3
Misure esterne H/L/P [mm]	850/600/600	1630/545/475
Pompa di dosaggio per decalcificante	•	•
Allacciamenti idrici	acqua fredda/calda	acqua fredda/calda
Scarico	a parete, modificabile	a parete, modificabile
Allacciamento elettrico	3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz	3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz



Lavapadelle	PWD 8549 AD
Nr. pappagalli per carico	2
Nr. padelle/pappagalli per carico max.	1/2
Programmi	3
Misure esterne H/L/P [mm]	1750/610/600
Pompa di dosaggio per decalcificante	•
Allacciamenti idrici	acqua fredda/calda
Scarico	a parete, modificabile
Allacciamento elettrico	3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz



Vuotatoi	APWD 075	APWD 076	APWD 077	APWD 078
Allacciamento idrico per risciacquo manuale	•	–	•	–
Allacciamento idrico per risciacquo automatico	–	•	–	•
Adatto a rubinetto idrico*	–	–	•	•
Misure esterne H/L/P [mm]	590/500/600	590/500/600	590/500/700	590/500/700

* Il rubinetto dell'acqua non è in dotazione.





Miele Italia S.r.l.
Strada di Circonvallazione, 27
39057 Appiano (BZ)

www.miele-professional.com
info@miele-professional.it



Immer besser (Sempre meglio)

Dal 1899 Miele è un'azienda familiare che opera secondo una chiara filosofia: Immer besser (Sempre meglio). Questo ambizioso obiettivo pone la pietra miliare per la proverbiale qualità, la sostenibilità e la forza innovatrice di un marchio "Made in Germany". Una promessa che conferisce ai professionisti la consapevolezza di aver scelto per il prodotto giusto.

Premiata

Affidabilità senza compromessi dei prodotti e del servizio di assistenza tecnica sono i motivi per cui Miele viene eletto il miglior marchio e quello in cui il cliente ripone maggiore fiducia. Riconoscimenti prestigiosi di design come MX Award, iF, reddot e il premio tedesco per la sostenibilità comprovano la eccellenza di Miele in materia di design, gestione della qualità e tutela delle risorse.

Competenza

Miele Professional sviluppa e produce da decenni con un elevato grado di perfezione pregiate macchine da lavanderia, lavastoviglie, apparecchiature per il lavaggio e la disinfezione. Accessori specifici, consulenza a tutto tondo e un servizio di assistenza tecnica Miele sempre pronto all'intervento consentono di ottenere da queste macchine l'optimum di prestazioni e redditività.

Miele Professional in internet

- Informazioni dettagliate su dati tecnici, dotazioni e accessori
- Prospetti da scaricare per tutti i gruppi di prodotto e tutti i settori di applicazione
- Rappresentazioni, istruzioni e presentazioni dei prodotti da visionare sul canale YouTube