

Miele


E R G O N O M I S C H
C U B E X E C O D R Y
T I J D B E S P A R E
N D W I F I N I E U W
X **E E N V O U D I G E**
B E D I E N I N G X X
V E I L I G X **C U B E**
X I N T U Ï T I E V E
N A V I G A T I E X X
E C O N O M I S C H X
T O U C H S C R E E N



Cube en **Cube X**: Tafel sterilisatoren

Miele Professional. Immer Besser.


STERILISATIE MET SYSTEEM

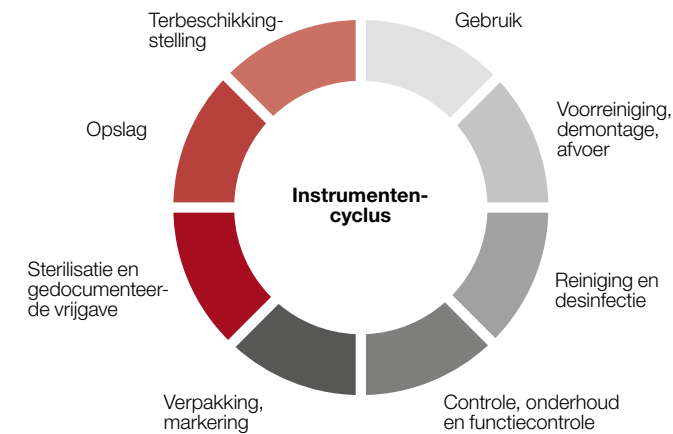

Innovatief, efficiënt en een all-in-one-oplossing: Met de innovaties Cube en Cube X breidt Miele zijn geïntegreerde systeemoplossing System4Med uit met twee krachtige kleine sterilisatoren, waardoor een veilige en betrouwbare behandeling van dentale instrumenten in zeer korte tijd wordt gewaarborgd. Zo kunnen praktijken van iedere omvang profiteren van waardevolle tijd- en kostenbesparingen, omdat niet alleen de instrumenten-cyclus, maar ook de administratieve inspanning wordt geoptimaliseerd.



VEILIG EN EFFICIËNT

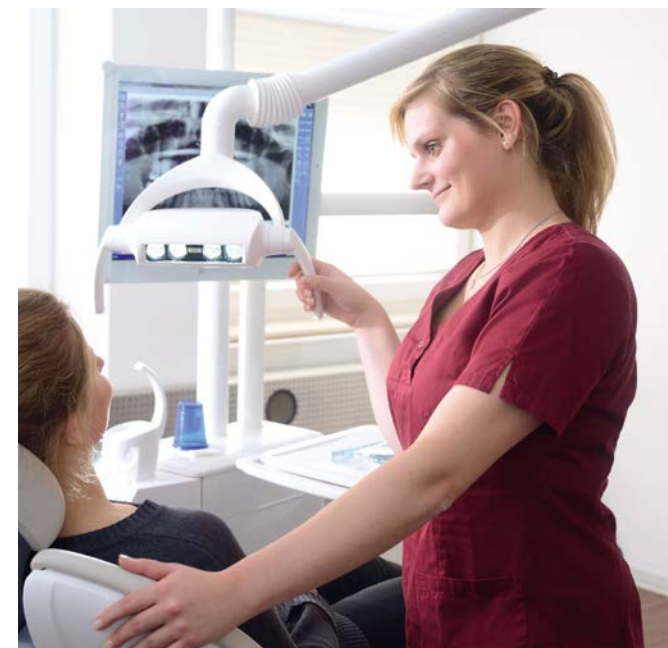

Dankzij een kortere programmaduur, een innovatieve droogtechnologie en een intuïtieve navigatie voldoen Cube en Cube X aan de hoogste standaarden met betrekking tot veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie in de dagelijkse praktijk. Beide modellen overtuigen door optimale droogresultaten, zijn uitgerust met een touch-kleurendisplay voor eenvoudige bediening en kunnen gemakkelijk in elke IT-omgeving worden geïntegreerd.

Of het nu gaat om een grote of kleine praktijk: Miele biedt twee modellen aan met verschillende kamergroottes, om tegemoet te komen aan de diverse eisen van dentale praktijken. Terwijl het performance-model Cube reeds over alle functies voor snelle en betrouwbare sterilisatieprocessen in moderne praktijken beschikt, biedt het premiummodel Cube X daarnaast veel innovatieve extra's, die een efficiënte instrumentencyclus op het technisch en economisch hoogste niveau garanderen.



PERFORMANCE-MODEL CUBE

VOOR EEN EFFICIËNTE INSTRUMENTENCYCLUS

Eenvoudig, betrouwbaar en efficiënt: het model Cube overtuigt door korte cyclustijden, optimale droogresultaten en lage verbruikswaarden. De compacte kleine sterilisator biedt veel nuttige functies voor efficiënte sterilisatieprocessen, is in twee kamergroottes (17 en 22 liter) verkrijgbaar en optimaliseert als centraal deel van een uitgebreide systeemoplossing de totale instrumentencyclus in kleine tot middelgrote praktijken.

- Praktische programma-instellingen zoals bijvoorbeeld programmeerbare programmastarts
- Gebruiksvriendelijke bediening
- Modern kleurendisplay
- Ergonomisch design
- Feilloze procesdocumentatie
- WiFi-Verbinding (optioneel)



ZEER KRACHTIG

VOOR KLEINE EN

GROTE PRAKTIJKEN

PREMIUM-MODEL CUBE X

OVERTREFT ZELFS DE HOOGSTE KWALITEITSEISEN

Innovatief, snel, veilig: het premium-model Cube X vergemakkelijkt dankzij een korte programmaduur, een zeer moderne droogtechnologie, een eenvoudige bediening en programmeerbare programmastarts het arbeidsproces in dentale praktijken en klinieken. Het apparaat is verkrijgbaar in twee kamergroottes (17 en 22 liter), beschikt over een geavanceerde netwerktechniek en biedt bovendien vele extra functies die garant staan voor meer comfort en zuinigheid in de dagelijkse praktijk.



- Verkorte looptijden dankzij EcoDry-technologie
- Individuele gebruikersovername
- Snelle cyclus voor onverpakte instrumenten
- Praktische programma-instellingen zoals bijvoorbeeld programmeerbare programmastarts
- Gebruiksvriendelijke bediening
- Modern kleurendisplay
- Ergonomisch design
- Feilloze procesdocumentatie
- WiFi-Verbinding (optioneel)
- Moderne onderhoudsondersteuning via 3D-animatie in het display van het apparaat



KWALITEIT EN ZEKERHEID

Betrouwbare sterilisatie van instrumenten

Veilige programmakeuze

Individuele sterilisatiecycli

Veilige instrumentenbehandeling via standaard klasse B-cycli, een klasse S-cyclus (afhankelijk van het model) en relevante testcycli zoals de vacuümtest.

Praktische programma-instellingen

Individuele flexibiliteit

Waardevolle kosten- en tijdbesparing in de dagelijkse praktijk dankzij individuele programma-instellingen zoals bijv. programmeerbare programmastarts.

Feilloze procesdocumentatie

Veilige gegevensoverdracht

Eenvoudige traceerbaarheid dankzij automatische opslag van de cyclusrapporten op een USB-stick. Barcode-etiketten kunnen probleemloos via de Miele etikettenprinter APH 550 Sego worden afgedrukt.

Individuele gebruikersovername

Digitale identificatie

Op verzoek kunnen de gebruikers van de Cube X, die sterilisatiebatches controleren en vrijgeven, digitaal worden geregistreerd. Naast de vrijgiftebevestiging kunnen de namen van de bedieners worden opgeslagen.

EFFICIËNTIE EN COMFORT

Meer zuinigheid in de dagelijkse praktijk

Geoptimaliseerde programmaduur

EcoDry-technologie

De Cube X overtuigt door korte cyclustijden, een lange levensduur, de instrumenten en een energiebesparing die loont. Met behulp van het gepatenteerde EcoDry past de droogduur zich aan de belading aan.

Compacte afmetingen

Ergonomisch design

Het ergonomische design van de apparaten zorgt voor extra comfort. Dankzij de compacte afmetingen kunnen de apparaten in elke praktijkomgeving worden geïntegreerd.

Eenvoudige bediening

Intuïtief kleurendisplay

Het grote kleurendisplay van de apparaten en een intuïtieve menustructuur maken het dagelijkse werk van het praktijkteam eenvoudiger, sneller en efficiënter.

Eenvoudige gegevensoverdracht

WiFi-dongle-key

Optioneel bestaat de mogelijkheid voor communicatie via WiFi. Daardoor kunnen gegevens bijzonder gemakkelijk naar andere softwaresystemen worden overgebracht.

Meer gemak

Automatische watertoevoerklap

Naast eenvoudig handmatig vullen van het waterreservoir kunnen de apparaten eenvoudig worden aangesloten op het Miele Plug & Pure-waterzuiveringssysteem.

U kunt vele andere voordelen en functies vinden op:
miele.nl/pro/cube



MEER EFFICIËNTIE IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK



TWEE MODELLEN, EERSTEKLAS RESULTATEN

		Cube		Cube X	
		17 liter PST 1710	22 liter PST 2210	17 liter PST 1720	22 liter PST 2220
Capaciteit					
Instrumenten		4,5 kg	5,5 kg	4,5 kg	6 kg
Textiel		1,5 kg	2 kg	1,5 kg	2 kg
Cassettes, containers		9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Programma's en besturing					
121 °C universele houdtijd: 20,5 min*	Leeg	65	66	35	35
	Volledig beladen	74	77	62	67
134 °C universele houdtijd: 5,5 min*	Leeg	43,5	46,5	22,5	22,5
	Volledig beladen	52,5	56,5	42,5	46,5
134 °C prionen houdtijd: 20,5 min*	Leeg	42	42	38	38
	Volledig beladen	67	70	59	63
Snelcyclus houdtijd: 3,5 min*	Leeg	–	–	13	13
	2 kg	–	–	20	21
Vacuümtest		19	20	17	18
Helix-B&D-test		23	24	21	21
Aansluitingen		2 x USB	2 x USB	5 x USB, 1 Ethernet	5 x USB, 1 Ethernet
Afmetingen en gewicht					
Buitenafmetingen h/b/d		452 x 465 x 634 mm	452 x 465 x 634 mm	452 x 465 x 634 mm	452 x 465 x 634 mm
Leeg gewicht		42,5 kg	44,0 kg	46,0 kg	47,5 kg
Afmeting kamer		Ø: 250 mm x T: 362 mm	Ø: 250 x T: 440 mm	Ø: 250 x T: 362 mm	Ø: 250 x T: 440 mm
Elektrische verbinding					
Stroomvoorziening		200–240 Vac, 50/60 Hz, 10 A	200–240 Vac, 50/60 Hz, 10 A	200–240 Vac, 50/60 Hz, 10 A	200–240 Vac, 50/60 Hz, 10 A
Verbruik		2,0–2,4 kW	2,0–2,4 kW	2,0–2,4 kW	2,0–2,4 kW
Normconformiteit		93/42/EWG, 2014/68/EU, 2012/19/EU, DIN EN 13060, EN 61010-1, EN 61010-2-040, EN 61326-1, EN 61770			
Leveringsomvang		3 x aluminiumtrays voor Cube/5 x aluminiumtrays voor Cube X, draaibare traydrager, trayhouder, afvoerslang, stroomkabel, deuropener en USB-stick			

*Programmatijden kunnen afhankelijk van de soort belading, droogtijd en stroom- en watertoevoer variëren.

INSTRUMENTENBEHANDELING HOLISTISCH GEDACHT

Krachtige apparaten, op maat gemaakte proceschemicaliën, de modernste software en maximale kwaliteit van de service – met System4Dent biedt Miele Professional een innovatief, compleet systeem voor een veilige en efficiënte instrumentenbehandeling. De beide nieuwe sterilisatoren Cube en Cube X zijn perfect afgestemd op de systeemomgeving en garanderen een probleemloze, behoedzame en economische sterilisatie van dentale instrumenten. Tandartspraktijken en tandklinieken profiteren zo van een integrale oplossing, die zowel de procescyclus als de administratieve inspanningen optimaliseert.



- **Reiniging, desinfectie en sterilisatie**
Innovatieve thermodesinfectoren met individueel verkiesbare uitrusting. Krachtige, kleine sterilisatoren voor de snelle en zekere behandeling van alle instrumenten.
- **Proceschemicaliën**
Op maat gemaakte proceschemicaliën voor een grondige en behoedzame reiniging van alle instrumenten.
- **Procesdocumentatie**
Intelligente documentatiesoftware voor altijd feilloos controleerbaar procesverloop.
- **Service**
De hoogste kwaliteit van Miele, ook bij advies, financiering, service en validatie.

Miele Nederland

Miele Professional
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen
www.miele.nl/professional

Contact en service

Telefoon: (0347) 37 88 84
Fax: (0347) 37 84 29
E-mail: professional@miele.nl (verkoop & algemene vragen)
E-mail: serviceprofessional@miele.nl (service & onderhoud)

Immer Besser

Sinds 1899 gaat familiebedrijf Miele volgens een duidelijke filosofie te werk: Immer Besser. Dit alomvattende streven vormt de basis voor de legendarische kwaliteit, duurzaamheid en innovatiekracht van een merk "Made in Germany". Een belofte die professionele gebruikers ervan verzekert dat ze het juiste product hebben gekozen.

Uitstekend

Compromisloze betrouwbaarheid ten aanzien van producten en service is voor veel gebruikers de reden om Miele regelmatig te kiezen als beste en meest betrouwbare merk. Prestigieuze onderscheidingen als de MX Award, de iF en reddot Design Awards en de Duitse prijs voor duurzaamheid tonen aan dat Miele ook op het gebied van design, kwaliteitsbeheer en efficiënt gebruik van hulpbronnen een bijzondere plaats inneemt.

Vaardig

Miele Professional ontwikkelt en produceert al decennia lang apparaten voor wasserettes, professionele vaatwassers, reinigings- en desinfectieapparaten en sterilisatoren die blijk geven van diepgaande kennis op productiegebied. Zorgvuldig afgestemde accessoires, uitgebreid advies en een Miele klantenservice met uitermate korte lijnen zorgen ervoor dat u met Miele altijd optimaal presterende, zuinige apparaten in huis haalt.