



Miele

Velg din ekspert. Få et nytt teammedlem.

Analytisk renhet for laboratorieglass —
med vår ExpertLine.



**Endelig et fleksibelt
teammedlem
som elsker rengjøring!**
Opplev høydepunktene til
ExpertLine.

Miele

**For alle bransjer
og spesialfelt**

15 000
testede driftstimer



Glassdør og kammerbelysning*



**Pålitelig kvalitet
for perfekte resultater**

Våre ExpertLine laboratoriemaskiner
garanterer at laborateglass blir
rengjort og tørket til analytisk renhet
på høyeste nivå for stabile og gode
resultater.


EASYLOAD

Fleksibel, rask og svært effektiv

Reservedeler fås kjøpt i inntil

15 år

etter at serien har gått ut av produksjon.

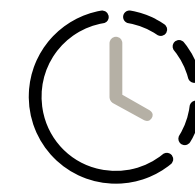

Bærekraftig

takket være optimaliserte
programmer

Intuitivt og raskt  **touchdisplay**



**Gode
tørkealternativer
for alle bruksområder**

Vår ekspert tilbyr ulike alternativer,
fra AutoOpen-funksjonen til DryPlus
varmluftstørking.

Digital nettverkstilkobling takket være



**Miele MOVE
Connect**

Enestående og effektiv rengjøringsytelse ved høy kapasitet

Spyletrykket justeres i tråd med de aktuelle rengjøringsbehovene – høyt trykk gjør det lettere å fjerne hardnakkete smuss, mens lavt trykk sørger for at laborateglasset blir jevnt fuktet, samtidig som det er ressursbesparende.



Mer om
ExpertLine
[www.miele.no/
pro/expertline-lab](http://www.miele.no/pro/expertline-lab)

*alternativ

Ditt effektive teammedlem.

Intuitiv betjening takket være touchdisplayet i farger.
Økonomisk drift, også for høy kapasitet på liten plass.

Intuitiv betjening

Det intuitive touchdisplayet i farger gir hurtigtilgang til favorittprogrammer. Individuelle innstillinger kan gjøres, og status for programmet er godt synlig og lett å forstå.

Raskt klar til bruk

Igangsetting av maskinen er optimalisert for å gjøre det raskt og enkelt. Og skulle det oppstå feil, er ExpertLine utformet slik at service kan utføres raskt og enkelt takket være den intelligente og optimaliserte plasseringen av kjernekomponenter.

Effektiv rengjøringseffekt

Med den frekvensstyrte sirkulasjonspumpen justeres spyletrykket i tråd med de aktuelle rengjøringsbehovene – høyt trykk gjør det lettere å fjerne hardnakkete smuss, mens lavt trykk sørger for at laborateglasset blir jevnt fuktet, samtidig som det er ressursbesparende. Ulike sensorer overvåker at spylearmene og spyletrykket fungerer som de skal.

Full oversikt

Takket være glassdøren (opsjon) og kammerbelysningen er det enda enklere å overvåke rengjøringsprosessen og raskt og enkelt å sette laborateglass inn i maskinen.





Miele

Ditt fleksible teammedlem.



Det fleksible tilbehørssystemet, EasyLoad, oppfyller alle krav til rengjøring av laboratorieglass, og gjør rengjøringen betydelig raskere, enklere og mer effektiv.

Når det gjelder tørking, tilbyr vår ekspert alternativer som AutoOpen-funksjonen og DryPlus varmluftstørking.



Ditt varige og bærekraftige teammedlem.

For oss er lang levetid mer enn bare et ord. Derfor er ExpertLine også testet for 15 000 driftstimer, og tilgjengeligheten av reservedeler i opptil 15 år sørger for at reparasjoner kan utføres lenge etter at maskinen har gått ut av produksjon.

Økonomiske programmer, utviklet for det aktuelle bruksområdet, korte programtider og ressursbesparende teknologier hjelper deg med å spare vann, strøm og vaskemidler, samtidig som det skåner miljøet.

Ditt internasjonale og digitale teammedlem.

Muligheten for enkelt å velge språk, gjør ExpertLine-modellene til de internasjonale ekspertene i teamet ditt. Veiledningssekvenser i displayet, er med på å sikre en smidig prosess.

Takket være nettverkstilkoblingen med Miele MOVE Connect kan maskindata vises fra hvor som helst og når som helst, og arbeidsprosessene kan optimaliseres. Du har også tilgang til maskinoppdateringer og får analyser av rengjøringsprosessen. For direkte servicesupport finnes det også et grensesnitt som kan overføre viktig informasjon til service avdelingen vår for å spare deg for tid og arbeid.



Velg din ekspert.

Alle ekspertene tilbyr maksimal effektivitet takket være høy kapasitet og ressursbesparende rengjøringseffekt med følgende høydepunkter:



Stort, intuitivt touchdisplay i farger



Flytende dosering med nivågjenkjenning (opsjon)



Omfattende programpakke



Full nettverkstilkobling: WiFi som standard, LAN som opsjon



Kammerbelysning gjør det enda enklere å sette inn og ta ut av maskinen



Skann QR-koden og finn ut mer om ExpertLine.
www.miele.no/pro/expertline-lab



ExpertLine PLW 8683 med EcoDry-teknologi og mulighet for glassdør

Vår EcoDry-teknologi har AutoOpen-funksjon, som sørger for at restfuktigheten slippes ut ved programslutt, slik at glassene avkjøles raskere og at maskinen kan tømmes raskt. Modellen med glassdør gjør det også enkelt å overvåke rengjøringsprosessen.

ExpertLine PLW 8693 med DryPlus varmluftstørking for best mulig tørkeresultat

Vår DryPlus varmluftstørking sikrer de beste tørkeresultatene, selv for smalhalsede laboratorieglass. AutoOpen-funksjonen sørger også for at restfuktigheten lettere slipper ut og at laboratorieglassene avkjøles raskere.



ExpertLine PLW 8683 CD med ekstra oppbevaringsplass for rengjøringsmidler og mulighet til å velge glassdør

I tillegg til DryPlus-varmluftstørking med AutoOpen-funksjon, tilbyr denne maskinen også praktisk oppbevaringsplass for rengjøringsmidler i sideskapet – også her kan du enkelt overvåke tørkeprosessen med modellen med glassdør.

Miele 360PRO.

En skreddersydd løsning for alle laboratorier.

Presisjon er et ansvar. Det er vår drivkraft.

Vi vet at presisjon er et ansvar for alle typer laboratorier. For å støtte deg på best mulig måte, tilbyr vi 360PRO. Vårt komplette system med perfekt tilpassede løsninger fra én og samme leverandør. Fra planlegging til bærekraft, fra tilbehør til nettverkstilkobling, fra rengjøringsmidler til vedlikehold, med de riktige laboratoriemaskinene: Vi er her for deg, slik at du kan fokusere på å levere resultater i toppklassen.



Mer om Miele 360PRO
www.miele.no/pro/lab

For omfattende beskyttelse.

Vår PROtect-service forener omfattende serviceytelser, maksimal budsjettstyring og enkel tilgang på reservedeler. Vi tilbyr deg transparent og bransjetilpasset rådgivning, koordinerer avtaler og garanterer tilgjengeligheten av passende reservedeler – selv 15 år etter at serien har gått ut av produksjon.



Mer om PROtect
www.miele.no/pro/protect

Miele

Bærekraftig ambisjon, Prisbelønnet design.

Bra for teamet ditt. Enda bedre for planeten.

Helt siden 1899 har «Immer Besser» vært vårt motto. Det motiverer oss til å bli bedre enn vi var i går. Det er motoren som driver oss til å bli bedre hver dag og utvikle mer intelligente maskiner. Vår ExpertLine setter nye standarder når det gjelder bærekraft. Driftskostnadene reduseres og det økologiske fotavtrykket minimeres takket være reservedeler som er tilgjengelige i 15 år. Samtidig sikrer testing i 15 000 driftstimer en ekstremt lang levetid. Nå med digital bruksanvisning som et avfallsfritt alternativ.

Miele ExpertLine er den stolte vinneren av iF Design Award 2024.

«Vi er glade for å ha mottatt disse prisene enda en gang, da de synliggjør toppkvaliteten på vår estetikk og design for omverdenen.»

Andreas Enslin, visepresident i Miele Design Centre



Ingenting kan erstatte **personlig kontakt.**

Kontakt oss for å finne ut mer om ditt nye teammedlem –
ring oss eller bruk kontaktskjemaet på nettsiden vår.

Telefon: 67 17 34 40

Mandag – fredag: 8:00–16:00



Mer om Miele ExpertLine
og til kontaktskjemaet
www.miele.no/pro/expertline-lab