



Primeiros passos com o Miele MOVE Connect

Monitorize as suas máquinas digitalmente e obtenha informações valiosas sobre os dados de desempenho, de programas e de consumo*. As máquinas aptas para ligação em rede podem ser ligadas ao Miele MOVE Connect e geridas através do navegador no seu computador, tablet ou telemóvel.




www.miele-move.pt

Registo e ativação da conta de utilizador

- Utilize o seu computador, tablet ou telemóvel e visite www.miele-move.pt através de um navegador à sua escolha.
- Para criar uma nova conta, selecione o botão «Registar».
- Introduza os seus dados e defina uma palavra-passe.
- Depois de clicar em «Registar», receberá um e-mail para ativar a sua conta.
- Clique na ligação contida nesse e-mail. Depois de ter lido e confirmado a Política de privacidade e as Condições de utilização, será encaminhado para o passo seguinte.
- A seguir ocorre a atribuição da empresa. Pode agora criar uma nova empresa ou juntar-se a uma organização existente. Os dados da sua empresa serão então associados à sua conta de utilizador.
- O registo e a ativação estão agora concluídos. Na próxima vez que visitar o website, pode iniciar sessão na sua conta de utilizador clicando no botão «Iniciar sessão» e introduzindo o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe.


Gestão de utilizadores e localizações adicionais (opcional)

- Caso necessário, convide utilizadores adicionais, selecionando no menu «Administração» e depois «Gestão de utilizadores».
- Introduza o endereço de e-mail do utilizador que pretende convidar e atribua uma função. Confirme a sua entrada clicando em «Enviar convite».
- O utilizador recebe um e-mail e pode agora também iniciar sessão. Dependendo da função, as funcionalidades estarão disponíveis para o utilizador de diferentes formas.
- Na área «Administração», também pode criar diferentes localizações e gerir o seu consentimento para a colaboração digital com a assistência técnica Miele Professional.

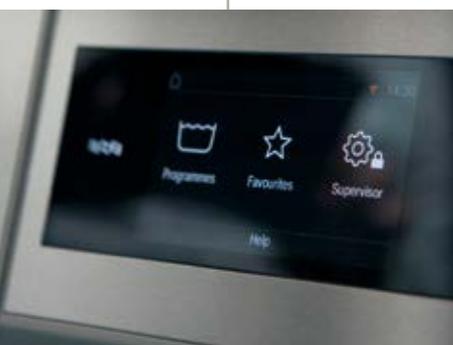

Assegurar uma ligação à Internet

- É necessária uma ligação à Internet para que possa ver os dados das suas máquinas em tempo real. Dependendo do modelo da máquina, a ligação em rede é possível através de LAN e/ou Wi-Fi. A opção mais conveniente é a LAN. Utilize esta opção se as condições no local da máquina o permitirem.
- Em primeiro lugar, certifique-se de que a sua máquina está ligada à Internet. As máquinas com visor mostram a ligação à Internet ativa através de um símbolo correspondente .
- O Miele MOVE Connect apoia-o passo a passo durante o processo de configuração. Isto é possível durante a colocação em funcionamento da sua máquina ou posteriormente e de forma autónoma.
- Em alternativa a uma rede com acesso fixo à Internet, existem opções de ligação móvel, por exemplo, através da utilização de um router LTE com um cartão SIM.

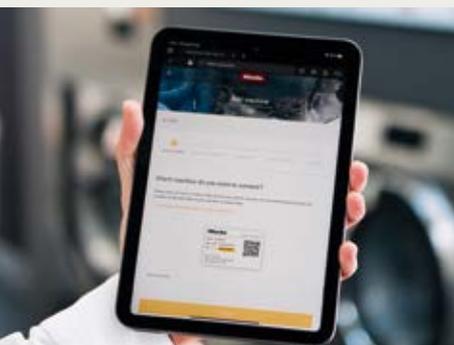

Criar e ligar máquinas em rede

- Para ligar uma nova máquina, o seu dispositivo terminal deve estar na mesma rede da máquina e próximo desta.
- Tenha na sua posse o número de série da sua máquina. Este encontra-se na placa de características, que está normalmente localizada no interior da porta do aparelho.
- No menu Miele MOVE Connect, clique em «Máquinas» e depois no sinal + no canto superior direito.
- Será agora guiado através do processo com instruções digitais passo a passo.
- A sua máquina é reconhecida e exibida pelo Miele MOVE Connect graças à ligação à sua rede local ou móvel. Agora, siga os passos seguintes para concluir o processo com sucesso.
- Após uma ligação em rede bem sucedida, tem a opção de personalizar os dados da sua máquina, como o nome da máquina ou os tempos de utilização (opcional). De seguida, a nova máquina é exibida na vista geral e fica visível para todos os utilizadores da sua empresa.
- Adicione um número ilimitado de máquinas gratuitamente.

Verificar requisitos técnicos

- É possível que a sua infraestrutura de TI tenha implementado medidas de segurança com o uso e configuração de uma firewall, o que pode ter causado o bloqueio de alguns websites (URLs) e portas. Para utilizar o Miele MOVE Connect sem erros, é necessário ter URLs e portas específicas ativadas. Teremos todo o gosto em fornecer-lhe uma lista correspondente.
- Se não existir uma ligação à Internet no local da máquina, pode ser configurada uma ligação à Internet móvel (router LTE com cartão SIM) como alternativa. Teremos todo o prazer em o aconselhar.

Pronto, vamos lá!

Agora está pronto para receber informações relevantes sobre as suas máquinas em qualquer altura e em qualquer lugar. Isto inclui dados da atividade operacional, provas da execução correta de processos de reprocessamento e informações interessantes sobre dados de consumo*.

A sua ferramenta digital de gestão de máquinas

O Miele MOVE Connect fornece-lhe informações transparentes sobre as emissões de CO₂ das suas máquinas Miele Professional, com base no consumo de eletricidade e água*. Tome decisões informadas para o seu negócio e atue de uma forma consciente em termos de custos e ambiente. Dê um MOVE ao seu negócio.

* A disponibilidade dos dados de consumo depende do modelo da máquina.



Miele MOVE
Connect