

**Miele**

Effektivt, säkert och hållbart:  
**Mieles brick- och behållarsystem  
EasyStore**

Miele Professional. Immer Besser.

**EasyStore**





## Brickor

- Optimala rengöringsresultat tack vare det breda brickgallret och minimal spolskugga
- Optimal placering och säker fixering av instrumenten i brickan
- Flexibla, anpassningsbara silikonavdelare
- Enkel öppning och stängning med en hand
- Vattenavrinning för perfekta torkresultat




## Sterilgoodscontainer


- Lufttät försegling av locket
- Snabb och steril borttagning av locket
- Snabbkopplingsklämmorna fungerar också som praktiska handtag för locket
- Fast och konstant stängning tack vare fjädrar i handtaget
- Snabbkoppling för enkelt byte av filter



## Höjdpunkter för Miele EasyStore

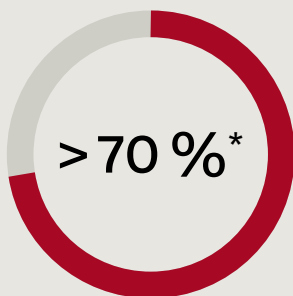

Tidsbesparing

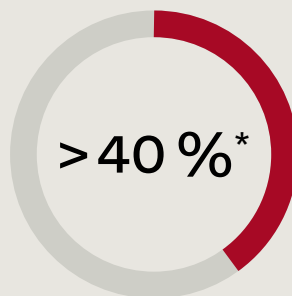

Kostnadsbesparingar



Hållbarhet

\* Besparingarna avser lastning och förpackning av instrument med Miele EasyStore jämfört med hantering av enskilda instrument. Kostnadsbesparingarna beräknades med hjälp av exemplet 120 instrument per batch, två batchar per dag, inklusive investeringskostnaderna för Miele EasyStore.

Mieles system för brickor och behållare hjälper dig att rengöra och förvara instrument snabbt, hållbart och effektivt. De olika storlekarna på brickor och sterilgodsbehållare är utformade för att du ska kunna säkerställa smidiga arbetsflöden – från patientbehandling till förvaring.



## Fördelarna med Miele EasyStore

**Tidsbesparing**

Ingen försegling av enskilda instrument i steriliseringsfilm.

**Kostnadsbesparingar**

Inga återkommande kostnader för tätningsmaterial.

**Hållbarhet**

Behovet av steriliseringsfilm minskar avsevärt. EasyStore är ett återanvändbart system.

**Personalsäkerhet**

Skydd mot kontaminering och nålsticksskador vid lastning och transport.

**Förlängd livslängd**

Skydd av instrument mot mekanisk skada.

**Effektiva arbetsflöden**

Standardiserade processer och optimerad organisering av instrumenten.

**Hög precision**

Enkel dokumentation med skanning av streckodsetiketter.

**Lång livslängd**

Lång livslängd tack vare högkvalitativa material.



### Instrumentrengöring


- Snabb och enkel placering av brickor i diskdesinfektorn
- Optimalt utnyttjande av produktens kapacitet tack vare specialinsatser
- Specialinsats för brickor ger högsta möjliga lastkapacitet som finns på marknaden
- Rengöring av upp till 18 brickor per batch

### Rengöring och desinfektion

Snabb och enkel placering av brickorna i diskdesinfektorn

**Städning**  
Säkert för personalen tack vare enkel och lufttät transport av använda instrument

**Leverans och förberedelser**  
Snabb leverans och optimal organisation av instrument till varje behandling

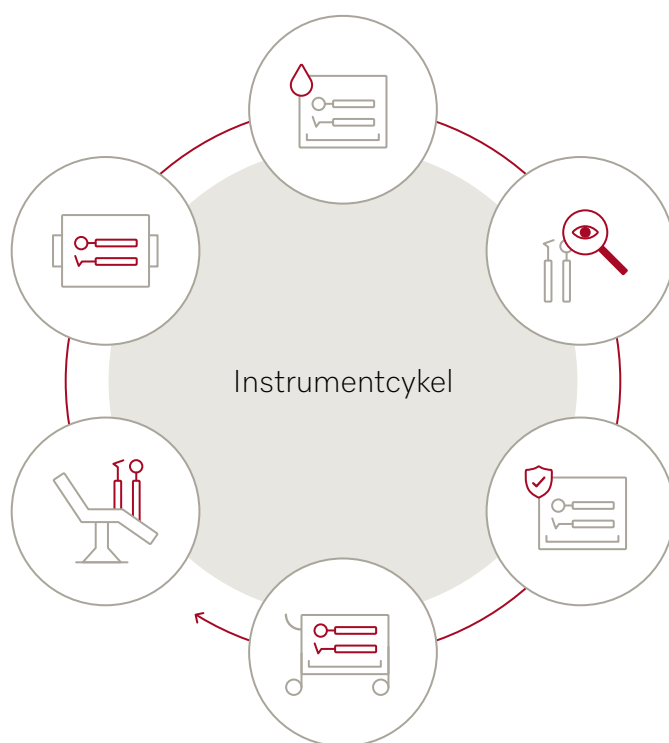

### Kontroll, underhåll och packning

Sparar tid och filmavfall genom att placera brickorna direkt i behållarna

### Sterilisering och godkännande

Enkel och säker lastning av sterilgodshållarna i autoklaven

### Förvaring

Steril förvaring av instrument



### Sterilisering

- Enkel och säker lastning av steriliseringsbehållare
- Ingen repning av steriliseringskammaren tack vare det speciella, roterbara stället
- Beredning av upp till tre steriliseringsbehållare APWD 334 eller upp till två steriliseringsbehållare APWD 335



**APWD 331**  
**Platt trådbricka, med tre silikonavdelare**

- Passar till sterilgodscorainer APWD 334
- H/B/D: 30 x 125 x 188 mm

  
**Materialnummer 12752230**



**APWD 332**  
**Platt trådbricka, med fem silikonavdelare**

- Passar till sterilgodscorainer APWD 334
- H/B/D: 30 x 176 x 273 mm

  
**Materialnummer 12752360**



**APWD 333**  
**Trådbricka, hög, med tre avdelare**

- Passar till sterilgodscorainer APWD 335
- H/B/D: 41 x 176 x 273 mm

  
**Materialnummer 12752420**



**APWD 334**  
**Steril behållare för platta trådbrickor**

- För placering av 1 x APWD 331 eller 1 x APWD 332
- H/B/D: 46 x 190 x 312 mm

  
**Materialnummer 12752500**



**APWD 335**  
**Sterilbehållare för att hålla platta eller höga trådbrickor**

- För placering av 1 x APWD 333 eller 1 x APWD 332
- H/B/D: 65 x 190 x 312 mm

  
**Materialnummer 12752580**



**APWD 336**  
**Långtidsfilter för upp till 1000 batchar**

- Bra torkresultat i behållaren
- Slitstark och långlivad
- Två filter per förpackning
- För användning i APWD 334 och APWD 335

  
**Materialnummer 12752660**



**APWD 337**  
**Etiketthållare**

- Storlek: H/B 18 x 56 mm
- För användning i brickorna APWD 331, APWD 332 och APWD 333

  
**Materialnummer 12752730**



**APWD 338**  
**Tätningssklämmor med indikator**

- För att förhindra oavsiktlig öppning efter ångsterilisering
- Indikator för ångsterilisering enligt EN ISO 11140-1 klass 1
- 100 stycken per förpackning

  
**Materialnummer 12566280**



**APWD 339**  
**Tätningssklämmor**

- För att förhindra oönskad öppning efter ångsterilisering
- 100 stycken per förpackning

  
**Materialnummer 12566300**

Miele AB  
Box 1397  
171 27 Solna  
Sweden

[www.miele.se/p](http://www.miele.se/p)  
08-562 29 800  
[professional@miele.se](mailto:professional@miele.se)