



Miele

När desinfektion kräver stor kapacitet. Och utrymmet är minimalt.

SlimLine — en ny ergonomisk lösning
för rengöring av dentalinstrument



Den perfekta kombinationen

av maximal
prestanda och
minimala
utrymmeskrav.

SlimLine

PWD 7121 och PWD 7122



SlimLine är endast 650 mm bred och tar upp mycket lite utrymme samtidigt som den erbjuder en generös nyttovolym på 252 liter. De tre lastnivåerna kan utformas på ett flexibelt sätt med olika korgar och insatser. Detta gör att du kan rengöra upp till 66 ihåliga instrument, 24 dentalkassetter, tre trådkorgar och andra instrument i en enda diskomgång.

Mer än bara en platsbesparare.

SlimLine i en överblick.

Maximera effektiviteten i hela din tandläkarmottagning. SlimLine-produkterna står vid din sida när det gäller att utnyttja det tillgängliga utrymmet optimalt. Med tillförlitliga resultat och användarvänlig drift.

Effektiv

- Kompakt, endast 650 mm bred
- Rymligt diskutrymme och en korg med tre nivåer för instrument och brickor för tandvård
- Korta drifttider tack vare ett kraftfullt och intelligent pumpsystem med en pump med variabel hastighet
- Maximal prestanda när det krävs
- Bästa möjliga vattenbesparing
- Ytterligare förkortning av programtiden tack vare uppvärmd tank*

* beroende på modell

Flexibel

- Flexibla vred med enkel anpassning av program till individuella behov
- 20 lediga programplatser
- Olika kombinationer för placering av diskgodset med en baskorg och ett varierat urval av moduler och insatser
- Flexibel användning av rengöringskemikalier med upp till 3 x 5-liters behållare för kemikalier integrerade i produkten
- Variant med två luckor tillgänglig som PWD 7122-modell

Ergonomisk

- Ergonomisk placeringshöjd för enkel i- och urlastning
- Automatisk dosering från behållare för kemikalier som förvaras inuti produkten
- Snabb och enkel ändring av konfigurationen utifrån olika behov

Intuitiv

- Intelligent 7-tums touchdisplay i färg, optimerade program och 20 lediga programplatser
- En display som är lätt att rengöra
- Programmerad för programvara för processdokumentation
- Programmerad för att anslutas till Miele Cloud System (Miele MOVE)




Ta en närmare titt.


Desinfektion på en helt ny nivå.

De användarvänliga lastkomponenterna, till exempel det flexibla korgsystemet, hjälper dig i dina dagliga rutiner. Genom att dela in diskhållaren i tre nivåer kan de modulära insatserna arrangeras på flera olika sätt, så att diskhållaren enkelt kan anpassas efter dina behov.

Exempel på placering av disk i **AWD 217**

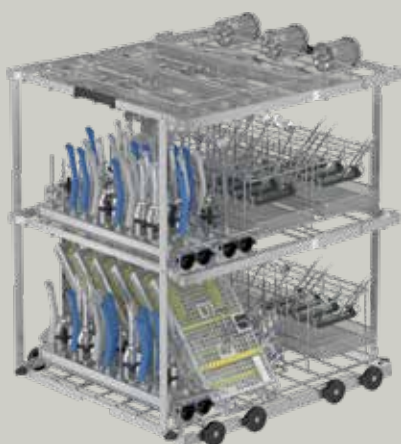


- 66 ihåliga instrument
- 160 instrumentset
- 6 dentalkassetter
- 18 avtrycksplåtar
- 3 trådkorgar
- 3 små filter med lock för olika små komponenter

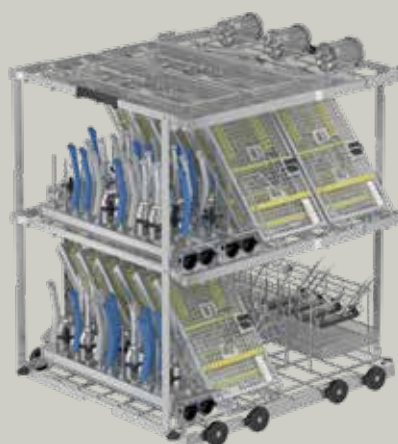

- 66 ihåliga instrument
- 18 dentalkassetter
- 14 pincetter
- 3 trådkorgar
- 3 små filter med lock för olika små komponenter

Alternativ: system med två luckor **PWD 7122**

SlimLine PWD 7122 har två luckor. Dessa möjliggör en uppdelning i ilastningssida och urlastningssida. Detta gör att du kan separera den orena sidan från den rena sidan på ett hygieniskt säkert sätt.

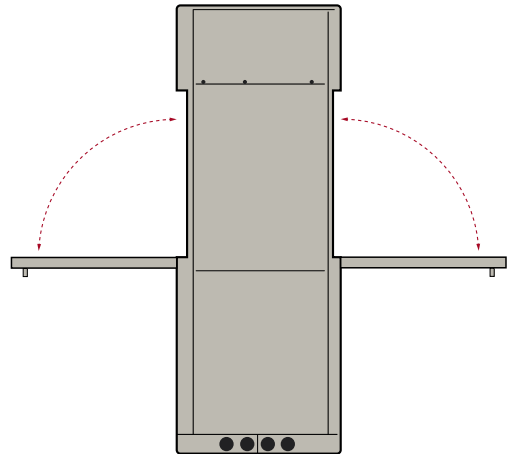

Miele



Miele

PWD 7121

PWD 7122

Allmän information

Yttermått [bredd x höjd x djup mm]	650, 1940, 700	650, 1940, 700
Diskutrymmets mått [bredd x höjd x djup mm]	570, 717, 590	570, 717, 590
Nyttvolym [liter]	252	252
Lastkoncept	Lastvagn med moduler och insatser	Lastvagn med moduler och insatser
Ergonomisk lasthöjd	◆	◆
Program	Vario TD Dental serviceprogram	Vario TD Dental serviceprogram
Lediga programplatser	20	20
Programval	7"-tums touchdisplay	7"-tums touchdisplay

Funktioner

Modell med en lucka	◆	—
Modell med två luckor	—	◆
Helglaslucka, lucka/luckor med gångjärn	◆	◆
Belysning i diskutrymmet	◆	◆
Material i diskutrymmet	1,4404/316 I (elektropolerad)	1,4404/316 I (elektropolerad)
Lufttorkning	◆	◆
HEPA H14-filter	◆	◆
Ångkondensator	◆	◆
Avloppspump	◆	◆
Doseringspumpar [antal]	2	2
Pump med variabelt varvtal	◆	◆
Vattenanslutningar	VV, KV, AD	VV, KV, AD
Elanslutning 3N AC 400 V, 50 Hz	◆	◆
Total anslutningseffekt [kW]	10,1	10,1
Wifi	◆	◆
USB-port	◆	◆
Ethernet-gränssnitt	◆	◆
Kapacitet för diskmedel	3 x 5 liter	3 x 5 liter
Läckagesensor	◆	◆

Funktioner (beroende på modell)

Förvärmningstank	◆	◆
Konduktivitetssensor	◆	◆
Integrerad vattenavhårdare	◆	◆

Tillvalsmoduler

Torkkontakter	◆	◆
Ytterligare doseringspump(ar)	◆	◆
Boosterpump för AD-vatten	◆	◆
Konduktivitetssensor	◆	◆
Kylning av avloppsvatten	◆	◆

Lastkapacitet (exempel)


66 ihåliga instrument 24 trådbrickor, 18 avtrycksplåtar 3 trådbrickor	◆	◆
6 ihåliga instrument 160 instrumentset, 18 avtrycksplåtar 3 trådbrickor	◆	◆

Miele 360PRO.

En anpassad lösning för varje enskild mottagning.

Precision är ett ansvar. Det är vår drivkraft.

Vi vet att instrumentrengöring är en viktig uppgift för tandläkarmottagningar inom alla specialområden. För att ge bästa möjliga stöd erbjuder vi 360PRO, ett komplett system med integrerade lösningar, allt från samma källa. Från planering till hållbarhet, från tillbehör till nätverk, från kemikalier för rengöring till underhåll och rengöring av arbetskläder: vi finns alltid här för dig så att du kan fokusera helt på dina patienter.

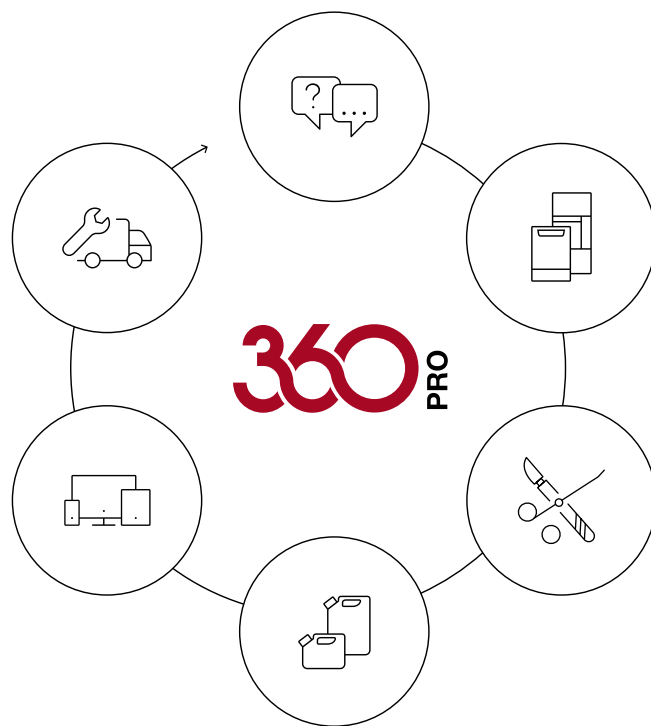

Mer om
Miele 360PRO för tandläkare
www.miele.se/pro/dental



Komplett **skydd.**

Våra PROtect Service-lösningar kombinerar heltäckande servicelösningar, maximal budgetkontroll och smidig leverans av reservdelar. Vi ger dig en tydlig och branschspecifik rådgivning, samordnar servicebesök och garanterar att passande reservdelar finns tillgängliga – upp till 15 år efter att modellserien har utgått.



Mer om Miele PROtect
www.miele.se/pro/protect

Hållbarhet

och utmärkt design.

Bra för ditt team, ännu bättre för planeten.

Immer Besser – det är vårt motto sedan 1899. Det driver oss att vara bättre imorgon, än vi var igår. Varje dag motiverar det oss att utveckla bättre och smartare lösningar. Tack vare att reservdelar till exempel finns tillgängliga 15 år efter att modellserien har utgått, sänks driftkostnaderna och det ekologiska fotavtrycket minskar. Produkter som testats i 15000 drifttimmar garanterar lång livslängd.



Mer om hållbarhet
hos Miele Professional
www.miele.se/pro/hallbarhet



Miele

Inget kan ersätta **personlig hjälp.**

Kontakta oss:

Telefon: 08 562 29 800

Må–fr 08:00–17:00

Mejl: professional@miele.se



Mer om Miele SlimLine Dent
www.miele.se/p