

Miele

E R G O N O M I C X X
C U B E X E C O D R Y
X **T I M E S** **A V I N G**
S A F E X W I F I X O
N E W X O **S I M P L E**
O P E R A T I O N E F
F I C I E N T **C U B E**
X O I N T U I T I V E
N A V I G A T I O N X
E C O N O M I C A L X
T O U C H S C R E E N



Cube og **Cube X**
De nye små sterilisatorer


Miele Professional. Immer Besser.

C U B E

C U B E X



STERILISATION MED SYSTEM

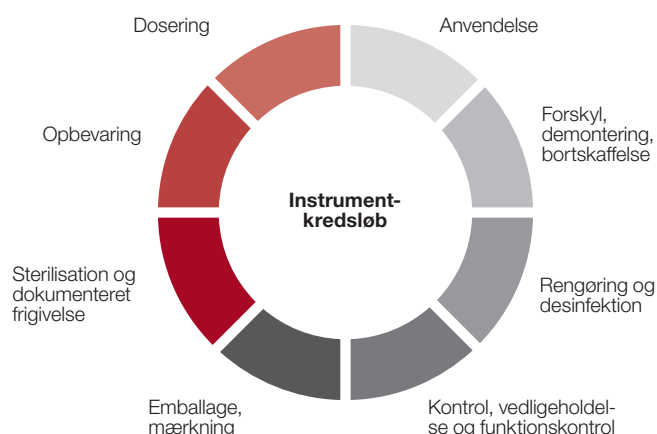

Innovativt, effektivt og alt fra samme leverandør: Med produktnyhederne Cube og Cube X udvider Miele systemløsning System4Dent med to effektive små sterilisatorer, der garanterer sikker og pålidelig genbehandling af tandlægeinstrumenter på maksimal kort tid. Praksisser i enhver størrelse nyder dermed godt af værdifulde tids- og omkostningsbesparelser, da det ikke kun er instrumentkredsløbet, men også det samlede administrative arbejde, der optimeres.



MED SIKKERHED STØRRE EFFEKTIVITET



Med kortere programtider, innovativ tørringsteknologi samt en intuitiv menustruktur lever Cube og Cube X op til de højeste standarder, når det kommer til sikkerhed, brugervenlighed og effektivitet. Begge modeller imponerer med optimale tørringsresultater, er udstyret med et touch-farvedisplay, der sikrer en enkel betjening og kan integreres i alle IT-miljøer.

Til både små og store klinikker: Miele tilbyder den lille sterilisator i to størrelser til de forskellige krav på tandlægeklinikker. Performancemodellen Cube sikrer hurtige og pålidelige sterilisationsprocesser på moderne klinikker, og premiummodellen Cube X er derudover udstyret med mange innovative ekstrafunktioner, der sikrer et effektivt og økonomisk instrumentkredsløb på et teknisk højt niveau.

PERFORMANCE MODEL CUBE TIL ET EFFEKTIVT INSTRUMENTKREDSLØB

Enkel, pålidelig og effektiv: Cube-modellen imponerer med korte cyklustider, optimale tørringsresultater og lave forbrugsomkostninger. Den kompakte lille sterilisator har mange nyttige funktioner til effektive sterilisationsprocesser, fås i to størrelser (17 og 22 liter) og optimerer hele instrumentkredsløbet på små og mellemstore klinikker.

- Praktiske programindstillinger som fx programmerbar programstart
- Brugervenlig betjening
- Moderne touch-farvedisplay
- Ergonomisk design
- Komplet procesdokumentation
- Wi-fi-forbindelse (valgfri)



EFFEKTIV TIL SMÅ OG STORE KLINIKKER

PREMIUMMODEL CUBE X

OVERGÅR SELV DE HØJESTE KVALITETSKRAV

Innovativ, hurtig, sikker: Premiummodellen Cube X letter arbejdsprocesserne takket være korte programtider, topmoderne tørringsteknologi, enkel betjening og programmerbar programstart. Produktet fås i to størrelser (17 og 22 liter), råder over moderne netværksteknik og tilbyder derudover en lang række ekstrafunktioner, der garanterer mere komfort og effektivitet på klinikken.



- Kortere programtider takket være EcoDry-teknologi
- Individuel brugerregistrering
- Hurtigcyklus til ikke-emballerede instrumenter
- Praktiske programindstillinger som fx programmerbar programstart
- Brugervenlig betjening
- Moderne farve-touchdisplay
- Ergonomisk design
- Komplet procesdokumentation
- Wi-fi-forbindelse (valgfri)
- Moderne guide til vedligeholdelse via 3-D-animation på produktets display



KVALITET OG SIKKERHED

Pålidelig sterilisation af instrumenter

Sikkert programvalg

Individuelle sterilisationscyklusser

Sikker genbehandling af instrumenter via standard-, klasse B-cyklusser, en klasse S-cyklus (afhængig af model) samt relevante testcyklusser, som fx vakuumtesten.

Praktiske programindstillinger

Individuel fleksibilitet

Omkostnings- og tidsbesparelser takket være individuelle programindstillinger, som fx programmerbar programstart.

Komplet procesdokumentation

Sikker dataoverførsel

Enkel sporbarhed takket være automatisk lagring af cyklusrapporterne på et USB-stik. Stregkodeetiketter kan let udskrives med Miele etiketprinter APH 550 Sego.

Individuel brugerregistrering

Digital brugergenkendelse

Efter ønske kan brugerne af Cube X, der kontrollerer og godkender sterilisationscyklusser registreres digitalt. Ud over godkendelsen kan navnet på det personale, der betjener maskinen, gemmes.

Læs om flere fordele og funktioner
på: miele.dk/pro/cube





EFFEKTIVITET OG KOMFORT

Store daglige besparelser

Optimerede programtider

EcoDry-teknologi

Cube X imponerer med kortere cyklostider, en længere levetid for instrumenterne og en energibesparelse, der betaler sig. Ved hjælp af den patenterede EcoDry-teknologi tilpasses tørringstiden efter fyldningsmængden.

Kompakte mål

Ergonomisk design

Produkternes ergonomiske design sikrer ekstra komfort. Takket være de kompakte mål kan produkterne integreres på alle klinikker.

Nem betjening

Intuitivt farve-touchdisplay

Produkternes store farve-touchdisplay og den intuitive menustruktur gør det daglige arbejde enklere, hurtigere og mere effektivt for klinikkens medarbejdere.

Nem dataoverførsel

Wi-fi-dongle

Som tilvalg er der mulighed for kommunikation via wi-fi. Dermed er det meget let at overføre data til andre softwaresystemer.

Høj komfort

Ventil til automatisk påfyldning af vand

Ud over nem manuel fyldning af vandbeholderen kan produkterne let tilsluttes Miele Plug & Pure-vandgenbehandlingssystem.



STØRRE EFFEKTIVITET PÅ KLINIKKEN



TO MODELLER, FØRSTEKLASSES RESULTATER

		Cube		Cube X	
		17 liter PST 1710	22 liter PST 2210	17 liter PST 1720	22 liter PST 2220
Kapacitet					
Instrumenter		4,5 kg	5,5 kg	4,5 kg	6 kg
Tekstiler		1,5 kg	2 kg	1,5 kg	2 kg
Kassetter, kabinetter		9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Programmer og styring					
121 °C Universal indvirkningstid: 20,5 min*	tom	65	66	35	35
	hel fyldning	74	77	62	67
134 °C Universal holdetid: 5,5 min*	tom	43,5	46,5	22,5	22,5
	hel fyldning	52,5	56,5	42,5	46,5
134 °C Prioner holdetid: 20,5 min*	tom	42	42	38	38
	hel fyldning	67	70	59	63
Hurtigcyklus holdetid: 3,5 min	tom	–	–	13	13
	2 kg	–	–	20	21
Vakuumtest		19	20	17	18
Helix-B&D-test		23	24	21	21
Tilslutninger		2 x USB	2 x USB	5 x USB, 1 ethernet	5 x USB, 1 ethernet
Mål og vægt					
Udvendige mål H/B/D		452 x 465 x 634 mm	452 x 465 x 634 mm	452 x 465 x 634 mm	452 x 465 x 634 mm
Tomvægt		42,5 kg	44,0 kg	46,0 kg	47,5 kg
Kammerstørrelse		Ø: 250 mm x T: 362 mm	Ø: 250 x T: 440 mm	Ø: 250 x T: 362 mm	Ø: 250 x T: 440 mm
Eltilslutning					
Strømforsyning		200–240 Vac, 50/60 Hz, 10 A	200–240 Vac, 50/60 Hz, 10 A	200–240 Vac, 50/60 Hz, 10 A	200–240 Vac, 50/60 Hz, 10 A
Energiforbrug		2,0–2,4 kW	2,0–2,4 kW	2,0–2,4 kW	2,0–2,4 kW
Overholdelse af standarder		93/42/EWG, 2014/68/EU, 2012/19/EU, DIN EN 13060, EN 61010-1, EN 61010-2-040, EN 61326-1, EN 61770			
Medfølgende udstyr		3 x aluminiumtrays til Cube/5 x aluminiumtrays til Cube X, drejelig trayholder, trayholder, afløbsslange, strøm kabel, døråbner og USB-stik			

*Programtider kan variere efter fyldningstype, tørretid samt strøm- og vandforsyning.



KOMPLET GENBEHANDLING AF INSTRUMENTER

Effektive produkter, skræddersyede procesmekanikaler, topmoderne software og den højeste servicekvalitet - med System4Dent tilbyder Miele Professional et innovativt, komplet system til en sikker og effektiv genbehandling af instrumenter. De to nye sterilisatorer Cube og Cube X er perfekt afstemt efter systemomgivelserne og garanterer en perfekt, skånsom og effektiv sterilisation af tandlægeinstrumenter. Tandlægeklinikker nyder dermed godt af en løsning i fire trin fra en og samme leverandør, der optimerer både proceskredsløbet og det administrative arbejde.





- **Rengøring, desinfektion og sterilisation**

Innovative termodesinfektorer med udstyr, der kan vælges individuelt. Effektive små sterilisatorer til en hurtig og sikker genbehandling af alle instrumenter.

- **Proceskemikalier**

Skræddersyede proceskemikalier til grundig og skånsom rengøring af alle instrumenter.

- **Procesdokumentation**

Intelligent dokumentationssoftware til procesforløb, der altid kan spores komplet.

- **Service**

Højeste Miele kvalitet også ved rådgivning, finansiering, service og validering.

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Tlf. Salg/Professional 4327 1510

miele-professional.dk
professional@miele.dk

Immer Besser

Siden 1899 har Miele som familievirksomhed handlet efter en klar filosofi: Immer Besser, altid bedre. Denne høje ambition lægger grundstenen for legendarisk kvalitet, bæredygtighed og innovationsstyrken ved et mærke "Made in Germany". Et løfte, der giver professionelle brugere vished for, at de har valgt det rigtige produkt.

Prisvinder

Kompromisløs pålidelighed ved produkter og service er grunden til, at brugere vælger Miele som det bedste og mest tillidsvækkende mærke. Anerkendte udmærkelser som MX Award, iF og reddit Design Awards samt den tyske bæredygtighedspris illustrerer Mieles fremragende position, også når det kommer til design, kvalitetsstyring og ressourcehensyn.

Kompetent

Miele Professional har i årtier med en meget høj egenproduktion udviklet og produceret førsteklasses vaskemaskiner, opvaskemaskiner, rengørings- og desinfektionsmaskiner samt sterilisatorer. Nøje afstemt tilbehør, omfattende rådgivning og proaktiv Miele Service sikrer maskinernes optimale ydelse og effekt.